



産婦人科ワークステーション

DG-WS Series



ユニットから効率的なワークステーションへ。

“忙しい”をサポートするために、収納をデザインすることで高めた作業性、そのデザインが生み出す快い空間。

DG-WS210

湿式タイプ

DG-WS210D

乾式タイプ

◆クスコウォーマー

湿式タイプ

加温機能により保温液は常温からでも準備できます。3段階の温度設定が可能。



乾式タイプ

滅菌パックに入れたまま保温が可能。3段階の温度設定でクスコを常時保温できます。



*写真はDG-WS210D(乾式タイプ)です。

◆洗浄ユニット

洗浄液の残量はLEDランプ表示と音でお知らせし、洗浄液補給の際には給水タンクが容易に取り出せます(タンク容量:3L)。3段階の温度設定が可能。

(洗浄嘴管をセットできるホルダー付き)



◆操作パネル

クスコウォーマーと洗浄液の状態は正面操作パネルにて一目で確認可能。



Storage

“診療プロセス”の一つひとつに目を向けた、医療器具・材料のための収納。

① 引き出し

小物類を見やすく、整理するのに便利。



② 正面棚

奥行きがあり、大きめの用具も収納可能。

③ スリム棚

3段階で高さ調整ができ、用途別にアレンジした収納が可能。



④ 扉付棚

3段階で高さ調整ができるため、用具類の大きさに合わせて収納可能。予備の保管にも便利です。



壁面収納 (オプション)

小物を目線の高さにすっきりと収納できるため、ワークステーション上のスペースを有効活用できます。

⑤ カウンター

縁があるので置いている物が落ちにくくなっています。オプションのサイドテーブルを取り付けることでより広く使えます。

⑥ サイド収納

細長い用具類を立てて収納可能。用具の種類ごとにまとめて整理するのに便利です。



⑦ ボトムラック

ボトル類や補充用のストック置き場としても便利。オープンになっているので一目で取り出せます。

*写真はDG-WS210(湿式タイプ)です。
*クスコ、小物類は付属品ではございません。

	①引き出し	②正面棚	③スリム棚	④扉付棚	⑤カウンター	⑥サイド収納	⑦ボトムラック
DG-WS210 DG-WS210D	●	●	—	—	●	●	●
DG-WS150 DG-WS150D	—	—	●	●	●	●	●
DG-WS150K DG-WS150DK	—	—	—	●	●	●	●
DG-WS110N DG-WS110DN	●	●	—	●	●	●	●
DG-WS100N	●	●	—	●	●	●	●

DG-WS150/DG-WS150K

湿式タイプ

DG-WS150D/DG-WS150DK

乾式タイプ

◆クスコウーマー

湿式タイプ

乾式タイプ

◆加温庫

3段階の温度設定で、洗浄液の入ったボトルを常時加温します。奥行きがあり500mLボトルの加温が可能。



◆スリム棚


2段式の棚になっており、取り外し可能。3段階で高さ調整ができるため、用具類の大きさに合わせた収納に便利です。



*写真はDG-WS150(湿式タイプ)
ウッド調(オプションカラー)です。

DG-WS150


DG-WS150D

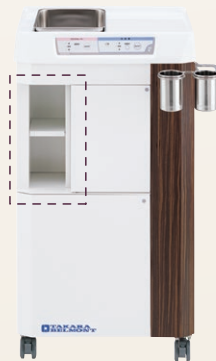

*写真はDG-WS150DK(乾式タイプ)
ウッド調(オプションカラー)です。

◆操作パネル

クスコウーマーと加温庫の温度状態は正面操作パネルにて一目で確認可能。

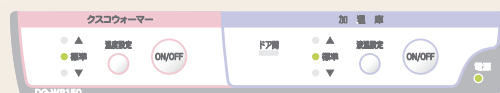

◆保温庫

加温庫で温めた500mLボトル(1本)を加温庫の液温設定に準じて保温します。



*写真はDG-WS150K(湿式タイプ)
ウッド調(オプションカラー)です。

DG-WS150K

DG-WS150DK



◆扉付棚

2段式の棚になっており、棚は3段階で高さ調整ができ、取り外しも可能。



DG-WS110N

湿式タイプ

DG-WS110DN

乾式タイプ



*写真はDG-WS110N(湿式タイプ)アイボリーベージュ(オプションカラー)です。

◆クスコウォーマー

湿式タイプ

乾式タイプ

◆扉付棚 ◆サービスコンセント

DG-WS100N



*写真はグリーン(オプションカラー)です。

◆扉付棚

◆サービスコンセント

Specifications

	クスコウォーマー	電気定格	質量	寸法 (mm)	製造販売届出番号 販売名	標準付属品
DG-WS210	湿式	AC100V 50/60Hz 450VA	66kg	510×400×950	27B1X00042000061 診療ユニット 産婦人科 ワークステーション	・鉗子立て2個・クスコトレイ1個 ・洗浄嘴管1式 ・シリコンホース(ホースクリップ付)1式 ・ブラシ1本(清掃用)
DG-WS210D	乾式	AC100V 50/60Hz 280VA	65kg	510×400×960		
DG-WS150	湿式	AC100V 50/60Hz 350VA	59kg	510×400×950	—	・鉗子立て2個 ・クスコトレイ1個
DG-WS150D	乾式	AC100V 50/60Hz 190VA	58kg	510×400×960		
DG-WS150K	湿式	AC100V 50/60Hz 370VA	58kg	510×400×950		
DG-WS150DK	乾式	AC100V 50/60Hz 210VA	57kg	510×400×960	—	・鉗子立て2個 ・クスコトレイ1個
DG-WS110N	湿式	AC100V 50/60Hz 230VA (サービスコンセント MAX1150W)	63kg	510×400×950		
DG-WS110DN	乾式	AC100V 50/60Hz 40VA (サービスコンセント MAX1150W)	62kg	510×400×960	—	・鉗子立て2個
DG-WS100N	—	AC100V (サービスコンセント MAX1400W)	60kg	510×400×950	—	

Options

壁面収納



DG-WS-A

鉗子立て2個、トレイ1個付

サイドテーブル



DG-WS-T

* クスコ、小物類は付属品ではございません。

Color Selection

ベーシックカラー



ピンク

オプションカラー (費用別途)




アイボリーベージュ
IV



グリーン
GR



ホワイト
WH

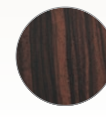

ウッド調
WD



カーボンブラック調
CB

診療用ライト

DG-30 Series

太陽光に近い色温度で
見やすさを追求したLEDライト。

- ☐ 適正な色再現性
- ☐ タッチレススイッチ
- ☐ 低消費電力
- ☐ 強制点灯モード

製品コード	DG-301S / DG-302T
電気定格	AC100V 50/60Hz 0.29A
光源	2W LED 5灯
標準照射パターン	φ150mm
照射距離	650mm
中心照度	2,500~20,000lx (調光)
中心色温度	5,000K

ユニットマウント

DG-301S

センサータイプ



製品コード: DG-301S
製造販売届出番号: 27B1X00042002047
販売名: 診療用ライト DG-301S

シーリングタイプ

DG-302T

センサータイプ



製品コード: DG-302T
製造販売届出番号: 27B1X00042002048
販売名: 診療用ライト DG-302T

DG-70 Series

コンパクトな灯体と軽快に動く
バランスアームで操作もスムーズ。

センサータイプ

マニュアルタイプ

- ☐ タッチレススイッチ
- ☐ マニュアル式スイッチ
- ☐ 照度切替可能
- ☐ 照度切替可能
- ☐ 強制点灯モード

製品コード	DG-701S / DG-701M / DG-702T
電気定格	AC100V 50/60Hz 0.65A
光源	ハロゲンランプ JA12V 55W
標準照射パターン	250×85mm
照射距離	900mm
中心照度	High 23,000lx Low 13,000lx
中心色温度	4,200K (Highモード時)

ユニットマウント

DG-701S

センサータイプ

DG-701M

マニュアルタイプ



製品コード: DG-701S
製造販売届出番号: 27B1X00042002039
販売名: 診療用ライト DG-701S

製品コード: DG-701M
製造販売届出番号: 27B1X00042002041
販売名: 診療用ライト DG-701M

シーリングタイプ

DG-702T

センサータイプ



製品コード: DG-702T
製造販売届出番号: 27B1X00042002042
販売名: 診療用ライト DG-702T

