

吸引式乳房組織生検対応


診察台 EX-MGT

天板シート部に“落とし込み”を採用した診察台。
より柔軟で幅広い診療を可能にします。




- 仰臥位・側臥位での診察・検査・処置にスムーズに対応。
- 天板シート部の落とし込みにより、側部・背部からのアプローチが容易。
- 電動油圧機構の採用で、スムーズな動作と500mmの昇降ストロークを実現。

患者さんの姿勢確保はもちろん、
細部まで使いやすさ・快適さに配慮しています。

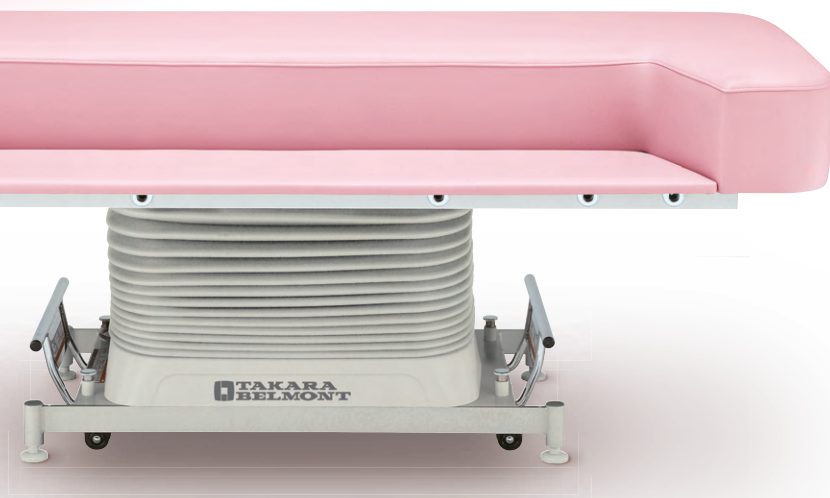

天板シート部に設けた落とし込み部は、側臥位での検査・処置時に患者さんのポジション確保を行いやすくすると同時に、検査機器の接近を可能としました。また、側部・背部からの検査・処置も容易に行えます。

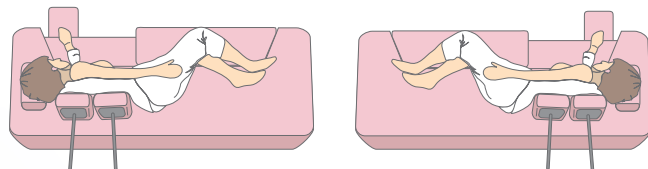

置きクッションの位置を変え、落とし込みの位置を頭側と脚側逆にすることで、左右側臥位に対応できます。

■ 胸受け



患者さんの姿勢を保持する胸受け。

■ 上肢台




側臥位での患者さんの腕を保持する補助上肢台。

■ 操作スイッチ



電動油圧機構を採用した本体昇降は二段階の作動速度を選択できます。

■ フリーキャスター

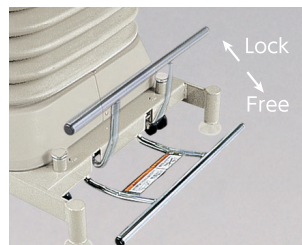

自在に移動できるフリーキャスター。ロック・フリーは片足だけの簡単操作。

キャスタータイプ EX-MGT-CC (受注仕様)

大型キャスターにより
スムーズに移動でき、
四輪フリー・四輪ロック・
直進ロックに対応。



■ カラーバリエーション

- ES19 (ベビーピンク) [標準色]
- ES6 (ローズミスト)
- ES15 (ライトグリーン)

■ 主な構成

フットスイッチ 1 個、電源コード 1 本、枕 1 個、上肢台 1 個、置きクッション (大・小各 1 個)、置きクッション用フェンス 2 個、胸受け 2 個、上肢保持用クッション 1 個

■ 仕様

製品コード	EX-MGT SN / EX-MGT-CC
本体外形寸法	700×1900mm
本体昇降範囲	670～1170mm
電気定格	AC100V 50/60Hz 430/520VA
操作電圧	DC5V
製品質量	137kg (標準タイプ) 175kg (キャストタイプ)
製造販売届出番号	27B1X00042000053
販売名	診察台 EX-MGT

吸引式乳房組織生検対応

診療椅子 マンモピュウ

販売名: 診療椅子 MM-PEW
製造販売届出番号: 27B1X00042000058



マンモグラフィ撮影対応

診療椅子 マンモキュート

販売名: 診療椅子 マンモキュート
製造販売届出番号: 27B1X00042000062



タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

<https://me.takarabelmont.co.jp>

営業所

札幌 (011)863-2139
新潟 (025)333-8405
広島/高松 (082)277-6700

仙台/盛岡 (022)231-3458
名古屋 (052)931-5163
福岡 (092)474-7306

さいたま (048)640-5803
金沢 (076)221-8412
鹿児島 (099)226-9481

東京 (03)3401-9795
大阪 (06)6211-5947

横浜/静岡 (045)523-7010
岡山 (086)233-8826



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。 ●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。 ●納期については、事前に弊社営業へご確認ください。 ●このカタログは2025年6月現在のものです。

30E250600120P
YY-ME157