

— 分娩台 —

DG-JN900

Easy to use and
comfortable



Simple style

シンプルスタイルの汎用型分娩台に、 介助しやすさとやさしさをプラス


ベーシックな操作感そのままに、
医療スタッフの介助性向上と、産婦さんへのやさしさを実現しました。

Point !

かんたん操作でベッドから分娩位に

フレキシブル支脚器

産婦さんの体型に合わせて、支脚位置と開脚幅の調節を2ステップでかんたんに行えます。

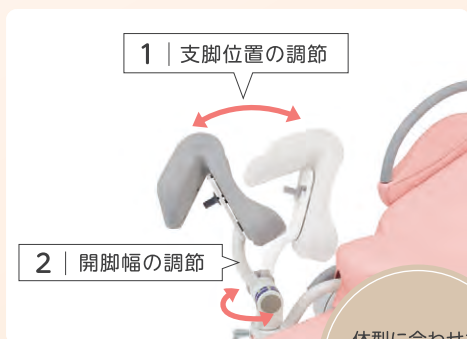

体型に合わせた
いきみやすい位置に
調節可能

メモリー機能搭載

本体の高さ・背もたれ角度・補助台
スライド幅をメモリーでき、分娩位
への移行がかんたんに行えます。

ワイヤレスフットスイッチ

コードがないため足元
がすっきりします。



陣痛期
回復期

介助しやすさを追求

電動スライド式補助台



フットスイッチで介助しやすいスライド幅に調節可能。スライド幅のメモリーも可能です。

介助スペース



出産時の介助性に配慮した腰板と補助台の位置関係を実現しました。

腰板単独昇降機構



腰板の単独昇降ができ、分娩状況に合わせて、いきみやすい姿勢へ調節可能です。

分娩期



介助しやすい
高さに調節できる
最高位 100cm

踵受けから股受けへの移行もスムーズ



産婦さんの
乗り降りに配慮した
最低位 58cm

踵受け



股受け



搬送を考慮した設計

大型4輪キャスター搭載



産婦さんを分娩台に乗せたまま搬送が可能です。

収納式サイドフェンス




回転式だから省スペースで収納でき、ストレッチャーの横付けも可能です。

スタッフをサポートする便利機能

サブスイッチ

フットスイッチのほか本体からの操作も可能です。

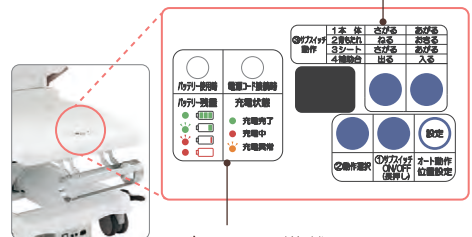

バッテリー搭載

バッテリー残量はLEDランプでお知らせします。

Option

ハンドスイッチ
DG-JN900-HSWN



分娩台マット
DG-JN900-GM



搬送用ハンドル
DG-JN900-TH



サイドレール／
イルリガートル架
DG-JN900-SR/DR-OPTM-ZNN



酸素ボンベホルダー
DG-JN900-BH



防水パイルカバー
DG-OPT-JN900PB/PL/PM



枕



Color variations



ES19
ベビーピンク



ES17
フロスグリーン(受注生産)





ES09
アイボリー(受注生産)



ES02
イエロー(受注生産)

Specifications

寸法図 [mm]

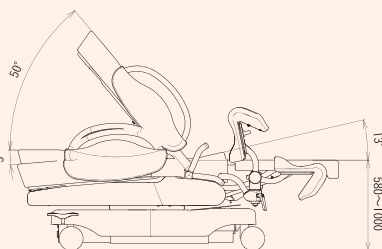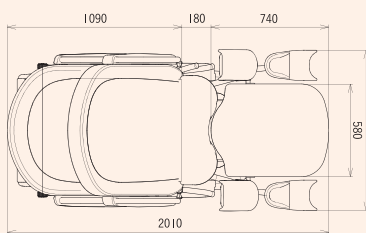

製品コード	DG-JN900
電気定格	AC100V 50/60Hz 520VA
質量	355kg
製造販売届出番号	27B1X00042000077
販売名	分娩台 DG-JN900

作動(運転モード)・・・非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1:5
*デューティサイクル:油圧モーターの連続作動時間に対する休止時間の比率
(ただし、環境温度により異なります。)

タカラベルmont株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
新潟 (025)333-8405	広島/高松 (082)277-6700
東京 (03)3401-9795	福岡 (092)474-7306
名古屋 (052)931-5163	鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://www.takabelmont.co.jp/medical/>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- このカタログは2023年12月現在のものです。

- お問い合わせ



環境に配慮した植物油インキを使用しています