

泌尿器科機器 総合カタログ

Urological Equipment

フラット機能搭載 & コンパクトな
椅子型検診台で、
よりスムーズな診療を。

WIRELESS

ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したワイヤレスフットスイッチを採用。コードが無いので診察室がスッキリします。



フラットポジション

閉脚したままワンタッチで容易にフラットポジションへ移行でき、ストレッチャー移載時や処置後の安静時、仙骨麻酔時などの体位変換にもスムーズに対応できます。

閉脚した状態でフラットポジションへ移行



側臥位イメージ



手すりを跳ね上げることで、ストレッチャー移載がスムーズに。



患者さんに合わせて、診療域をより広く

フットスイッチによる左右開脚のセレクトと開脚調節が可能で、診療内容や患者さんに応じたポジショニングを実現します。



通常開脚



閉脚検診位



セレクト開脚

患者さんへの思いやりをカタチに

■ 座 面

椅子のように座面を備え、安定した座位姿勢を提供。当社従来品より座面の奥行を短くし、腰掛けやすくなりました。



■ レッグサポート機構

膝受けは下腿から支える形状を採用。脚を広範囲で支えるため開脚時の安定感がアップ。



コンパクトな設置スペースを実現

回転は、ベース円周に沿って本体上部が移動する独自の回転機構「オフセットラウンド機構」を採用。回転半径の縮小*により設置スペースがコンパクトに。(回転タイプのみ)

*当社従来製品比。



検診位までスピーディに移行

乗降位置から検診位への移行時間を最大約40%短縮*。診療時間を有効に活用できます。

*当社従来製品比。

ワイドにフォローする汚水トレイ

ワイドな汚水トレイが水の飛散をフォロー。2ポジションの電動昇降式のため、下降させることで患者さんへの接近も容易に。また腐食に強い樹脂製汚水トレイは着脱が可能で、お手入れが容易に行えます。



■スプラッシュガード(オプション)

前方への水跳ねを軽減するオプションをご用意しました。



診察をサポートする便利機能

●本体補助スイッチ搭載

●ショックレス回転

●プリセット2メモリー搭載

●音声ガイド機能

Option

・上肢台
DG-7300-A



・ロールシート(12本入り)



・スプラッシュガード
・シートヒーター DG-7300-E
・股受けカバー
○DG-OPT-KB2
・排水トラップ
・汚水タンク
小型(容量5ℓ) 大型(容量10ℓ)

Color Variation



ES16



ES19(受注生産)



ES17(受注生産)






ES09(受注生産)



ES02(受注生産)

Dimensions

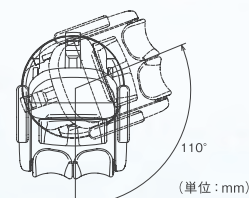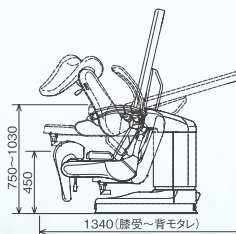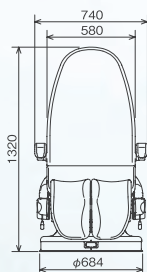

(単位:mm)

Specification

製品コード	UR-7300(回転タイプ)	UR-7300-F(固定タイプ)
本体昇降/本体チルト	電動油圧式、フットスイッチ操作	
本体回転	電動油圧式、110°左右切替方式	—
プリセット/オートリターン動作	○	
電気定格	AC100V 50/60Hz 900/1000VA	
操作	フットスイッチ(赤外線通信)	
フットスイッチ電源	DC6V(乾電池)	
質量	230kg	210kg
製造販売届出番号	27B1X00042000068	
販売名	泌尿器科検診台 UR-7300	

作動(運転)モード
非連続作動、最大3分、
デューティーサイクル 1:5

※ デューティーサイクル：
油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の
比率(ただし、環境温度により異なります)。

標準付属品

- 枕 1個
- 膝受けバンド 1組
- 汚水トレイ(金網付) 1式
- 排水ホース(バンド付) 1式
- フットスイッチ 1個
- ビニールシートカバー 1枚

さまざまな診察や処置をサポートできる機能がこの一台に。



開脚位

脚を広範囲で支えるため開脚時の安定感がアップ。



フラットポジション

低初高でのフラットポジションを実現。



セレクト開脚機能

フットスイッチ操作にて左右片方ずつ徐々に開脚できるので、患者さんに応じた対応が可能です。

ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したフットスイッチの採用により診察室がスッキリします。



骨盤高位ポジション

シート部は単独でチルト可能。診察時の視野確保に役立ちます。

本体補助スイッチ

操作が補助的に行えるよう、本体側面に設けています。




Option

・上肢台
DG-FL750-A

・サイドフェンス
DG-FL750-SF

・ロールシート(12本入り)

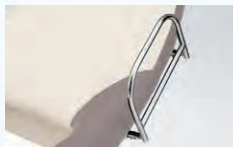

※上肢台とサイドフェンスの取付には取付金具(DG-FL750-TK)が別途必要です。

・シートヒーター
DG-FL750-E


・汚水タンク
小型(容量5ℓ)
大型(容量10ℓ)

・排水トラップ

Color Variation

● ES9 ベージュ ● ES23 アルドブルー (受注生産) ● ES20 ピンク (受注生産)

Dimensions

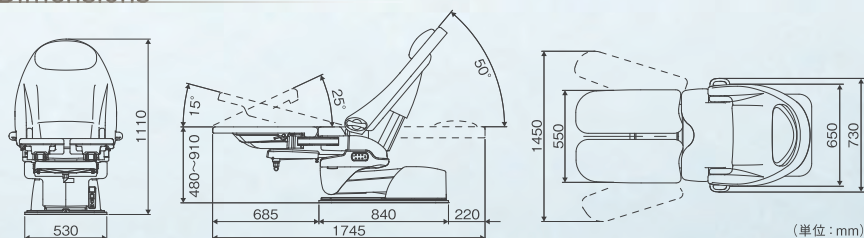

Specification

製品コード	DG-FL750K1
本体昇降範囲	480mm~910mm
背モタレ寝起範囲	0°~50°
シートチルト範囲	0°~15°
プリセット/オートリターン動作	○
電気定格	AC100V 50/60Hz 5A
フットスイッチ電源	DC6V(単三乾電池4本)
質量	208kg
製造販売届出番号	28B1X00012000069
販売名	検診台 DG-FL750

作動(運転)モード・・・非連続作動 最大3分、
デューティーサイクル 1:20

※ デューティーサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率(ただし、環境温度により異なります。)

標準付属品

● 枕 1個 ● 汚水トレイ(金網付)1式 ● 排水ホース(バンド付)1式
● フットスイッチ 1個 ● ビニールシートカバー 1枚

ベッド状での診察や
軟性鏡検査が可能。



低初高&高ストローク

本体昇降範囲が47~97cmと患者さんには乗り降りしやすく、先生には診察しやすい高さを実現しました。

脱着可能な脚板と膝受け

仰臥位での診療・検査時には足板を、砕石位での検査・処置時には膝受けを装着することが可能。1台でふたつのポジションングを実現します。

スライド収納が可能な汚水トレイ

汚水トレイは、収納可能なので、患者さんの不快感をやわらげます。

ロックペダルで簡単操作の4輪フリーキャスター

縦方向はもちろん、横方向にも自由自在な4輪フリーキャスターと、操作の簡単なロックペダルを採用しました。

Option

・上肢台
EX-A




・サイドフェンス(S)
EX-S



・イルリガートル架
EX-URO-D




・カーテン架
EX-URO-C

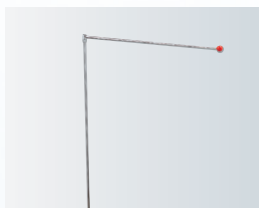

- ・シートカバー
EX-URO-S
- ・汚水タンク
小型(容量5ℓ)
大型(容量10ℓ)
- ・枕

※上肢台、サイドフェンス(S)の取付には、取付金具(1ヶ所につき2個)が別途必要です。

Dimensions

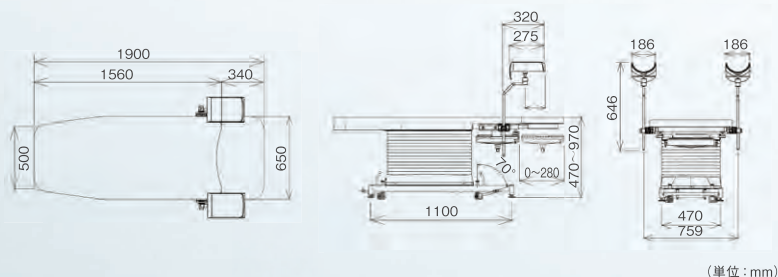

標準付属品

- 足板 1枚 ●背もたれクッション 1個 ●膝受け 1組
- 汚水トレイ(金網付)1式 ●排水ホース(ハンド付)1式

Specification

製品コード	EX-URO SN
本体昇降範囲	470mm~970mm
2ポジションメモリー機能	フットスイッチ操作
スライド式汚水トレイ寸法	W352mm×D325mm
本体移動機能	4輪フリーキャスター ロックペダル操作
電気定格	AC100V 50/60Hz 4.3/5.2A
操作電圧	DC5V
質量	122kg
製造販売届出番号	27B1X00042000040
販売名	診察台 EX-URO

患者さんにやさしい乗り降りと、
スムーズな昇降で
効率的な診療を。

ワイヤレスフットスイッチで 足元スッキリ!

赤外線が360°送信され、操作時の
配置や向きがアップ。



本体補助スイッチを装備

本体に「P:プリセット」「R:リターン」
操作スイッチを装備。本体からの
操作も可能です。



大型汚水トレイを装備

洗浄水の水跳ねを軽減するメッ
シュ板を装備した、2段式スライド
汚水トレイを採用しました。

スムーズな昇降を実現

ショックの少ないスムーズな動きの
電動油圧機構を採用しました。

乗り降りしやすい最低位

高齢者の方でも乗り降りしやすい
最低位49.5cm。

効率的な診療をサポート

プリセット、オートリターン機能の
採用で、操作性の向上と効率的な
診療が行えます。

Option

・上肢台
DG-325-A



・サイドフェンス
DG-325-SFS



・医師用肘置き
UR-325-I



・足板
DG-325-H




・カーテン架
UR-325-CBK



・シートヒーター DG-325-E
・ロールシート(12ヶ入)
・汚水タンク
 小型(容量5ℓ) 大型(容量10ℓ)
・排水トラップ
・ビニールシートカバー

※上肢台、サイドフェンスの取付には、サイドレール(DG-325-A-SR、2本1組)
が別途必要です。

Dimensions

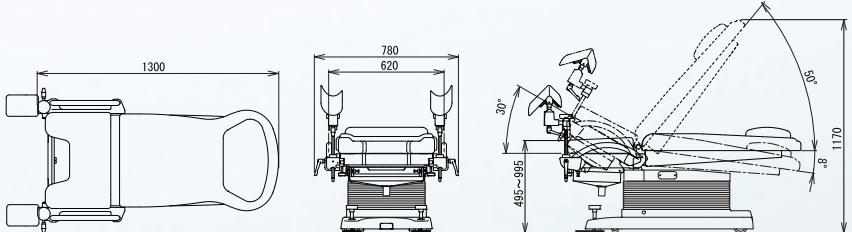

作動(運転)モード

非連続作動、最大3分、デューティーサイクル1:5

※ デューティーサイクル: 油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率
(ただし、環境温度により異なります。)

標準付属品

●枕 1個 ●フットスイッチ 1個 ●膝受け1組
●汚水トレイ(金網付)1組
●排水ホース(バンド付)1式

Specification

製品コード	UR-325
本体昇降範囲	495mm~995mm
背もたれ昇降角度	-8°~50°
シート昇降角度	0°~30°
プリセット/オートリターン動作	○
電気定格	AC100V 470/540VA 50/60Hz
質量	137kg
製造販売届出番号	27B1X00042000087
販売名	泌尿器科検診台 UR-325

思いをかたちに タカラベルモントの医療空間づくり


医院・クリニックの設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

医院空間の
設計・施工

精度の高い
医院づくり

医療機器の
開発・提供

タカラベルモントはグループの専門ノウハウを活かし、
表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

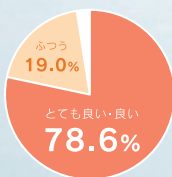

お取引経験者 満足度

※2020年6月時点 社外サーベイ調査結果
(当社調べ、n=42) 当社「空間デザイン・工事」
事業の認知者のうち、お取引経験のある方を
対象とした「空間デザイン」に関する評価。



タカラベルモント メディカル事業部公式

施工事例やお役立ち情報を発信中♪
@takara_designworks_medical



タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
新潟 (025)333-8405	広島/高松 (082)277-6700
東京 (03)3401-9795	福岡 (092)474-7306
名古屋 (052)931-5163	鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- このカタログは2024年1月現在のものです。

●お問い合わせ



環境に配慮した植物油インキを使用しています