

DG-385

緊急分娩、緊急処置への対応を
可能にした機能型分娩台。



フットスイッチで
基本操作が可能。



- ・本体昇降
- ・縦転
- ・横転
- ・縦横転水平復帰
- ・背モタレ昇降
- ・補助台スライド
- ・シート部昇降



※汚水ルート・枕はオプションです。

FEATURE

縦横転機構・電動スライド式補助台が、緊急時の対応をきめ細かくサポートします。


■ 縦横転機構

麻酔処置、血圧低下への対応など、
緊急時のポジション確保が可能。
縦横転の水平復帰はオート操作で
行えます。

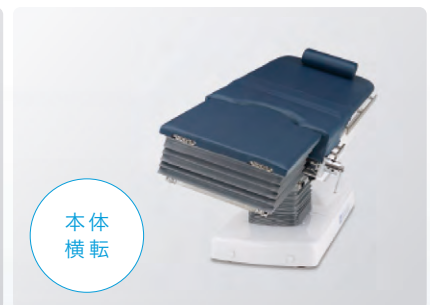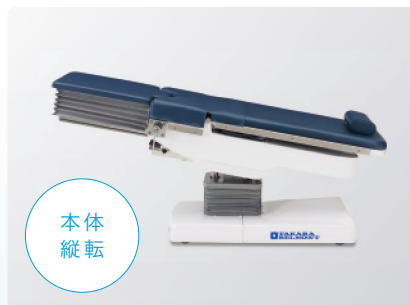

■ 電動スライド式補助台


補助台のスライドは電動で調節が
可能。分娩の進行状況や処置に合わ
せた対応ができます。

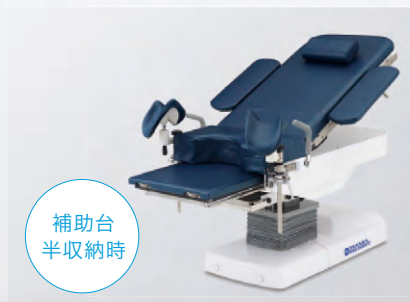

■ 着脱式クッション

補助台・シート部のクッションが取り外せるので、清拭が容易に行なえます。


取り外し後 ▶

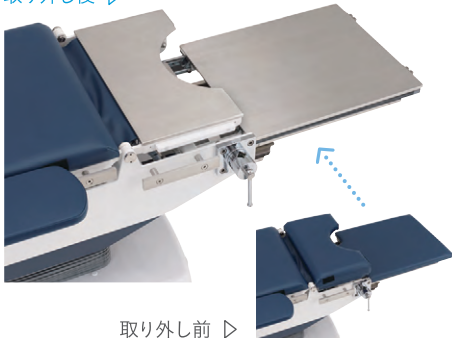

取り外し前 ▶

■ キャスター+本体ロック

キャスター+本体ロックで移動・固定が容易に。分娩前後のセッティング、清掃時などの移動がスムーズです。

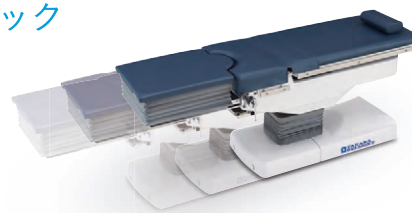

■ 抗菌・耐アルコールレザー

菌の増殖を抑制し、アルコールの耐性を持つレザーの採用でお手入れがしやすくなります。



抗菌性

JIS Z 2801:2010「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。 ※当社基準に基づく

OPTIONS




股受け(左右1組)
DG-396N-C



踵受け(左右1組)
DG-396-BN



上肢台
DG-385-AN

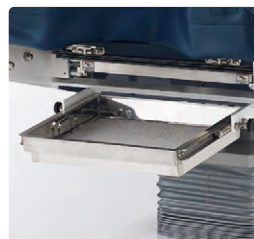



汚水ロート
DG-385-XR



枕
EX-CS-MS ES23

SPECIFICATIONS

寸法図 [単位:mm]

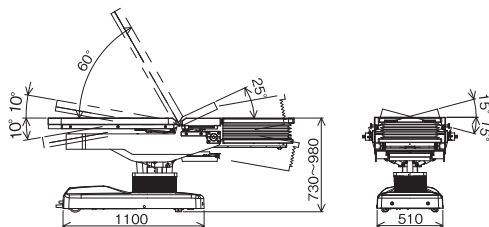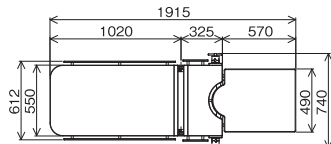

仕様	製品コード	DG-385V
	電気定格	100V 50/60Hz 5A
	質量	290kg
	製造販売届出番号	28B1X00012000072
	販売名	分娩台 DG-385

標準付属品 シートカバー1枚/フットスイッチ1個/股受支柱/怒責桿1組/電源コード



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、
リラックスしてほしい、もちろん健康になってほしい、
そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルmont、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの
詳細はこちらから



<https://whc-takara.jp/>

