

Meving

シャンプーチェア メビング

TAKARA
BELMONT

シャンプータイムを快適に。
身体を包みこむような寝心地のシャンプーチェア。

ハンモックスタイル採用！




乗り降りしやすい 最低位 555mm

足元がすっきりとしたデザインで、スムーズな乗り降りをサポートします。



背ずれを軽減する リクライニング機構

背もたれの回転支点を人間の腰の回転支点に近づけ、リクライニング時の背ずれや腰の浮きなどの違和感を軽減します。

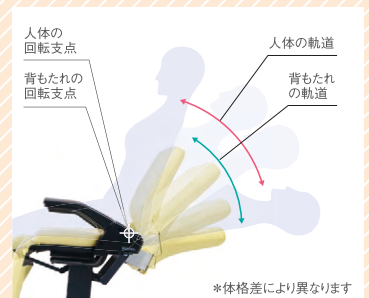

*体格差により異なります

やさしく身体を包み込むような寝心地

シートや背もたれの芯材に適度に伸縮性のあるシートサスペンション材を使用。背もたれにはやわらかさのあるウレタンモールドクッションを採用し、ハンモックのように患者さんの身体の凹凸に合わせ、やさしく包み込むようにフィットします。



医療機器へも採用されている抗菌・耐アルコールレザー

●抗菌性

JIS Z 2801:2010「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌試験を実施。



●耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。

※当社基準に基づく




スタッフさんにうれしい、日々のワークをスムーズにする機能を搭載。



**左右のどちらからでも洗髪可能な
コード付きフットスイッチ**

スイッチを押している間、背もたれ・レックレスト・本体昇降が連動して動き、椅子状態からシャンプー姿勢への移行がスムーズに行えます。また、本体から独立したコード付きのフットスイッチのため、左右のどちらからでも洗髪可能です。

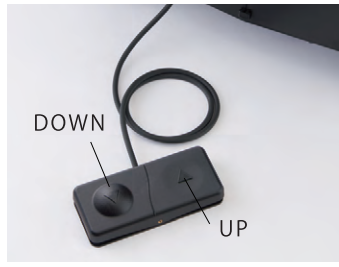

**車椅子の入出時や
清掃時などに移動できる
キャスター搭載(ロック付)**




Specifications

■仕様

品番	DR-MSC
外形寸法	W595×D750~1170×H930mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	330/400W
質量	55kg


■寸法図

(単位 mm)

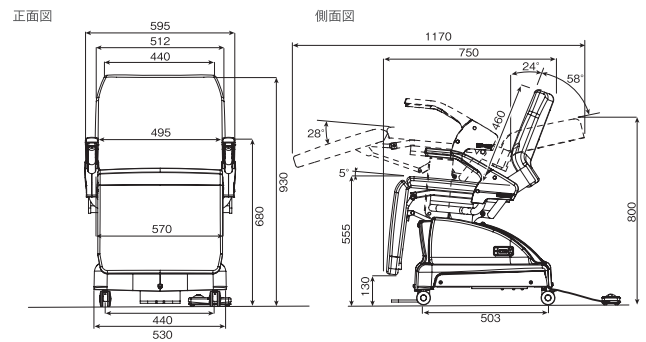

■設置寸法図

(単位 mm)

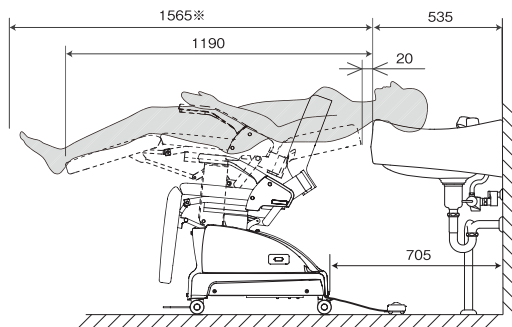

※身長170cm程度の人が寝た場合の参考値です。身長の方の場合は余裕をみて設置してください。

Color Selection



患者さんにとっても、スタッフさんにとっても快適なサイドシャンプーを

サイドシャンプーボウル [マジョリカボルト]

MAJOLICA PORTO

▶ 広く使いやすいボウルデザイン




温度調節ハンドル
止水ハンドル

シャンプーボウル
EX-SB 2W
水栓金具セット
EX-SB P(S)2
外形寸法: W640×D535×H240mm
ボウルカラー: ホワイト[W]

※マジョリカボルトは陶器製のため
製品ごとに形状のバラつき等が
ございますので、予めご了承ください。

▶ 患者さんにやさしい設計

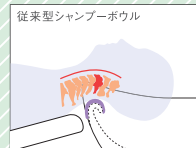

従来型シャンプーボウル
ネッククッションと首との接触面が首中央部のみに限定的。



マジョリカボルト
厚みのある柔らかなジェルクッションが首の付け根まで幅広くサポートでき、首への負担を軽減。



リラクゼーションピロー
Shampoo Revolution



耐水性・耐薬性に優れた海外の特殊スポンジと塗料を使用した非常にソフトなネッククッション。

サイズ: 約 W190×D110×H80mm
/ サイドシャンプー用

タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620 <https://me.takarabelmont.co.jp>

営業所 札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795 名古屋 (052)931-5163
新潟 (025)333-8405 金沢 (076)221-8412 大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700
福岡 (092)474-7306 鹿児島 (099)226-9481



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。 ●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。 ●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。 ●このカタログは2024年12月現在のものです。

50B24120030P
YY-ME446