

やさしい、コンフォート。

ソフィール
feel

**TAKARA
BELMONT**

快適で、安心感につつまれたリカバリーチェア<ソフィール> よりやさしい治療風景がみえてきます。

feel comfort

やさしく安心感にあふれた、治療の時間と空間を実現するために。患者さんの視点に立ち、長時間座っても疲れにくい座り心地の良さはもちろんのこと、治療の時間を快適に過ごせるよう配慮し、オプション類を含め機能やディテールに様々な工夫を取り入れました。

化学療法室

透析センター

点滴室

リカバリー室


※写真の製品は、ステップタイプ(RL-SFNST)です。

やさしく快適なりカバリー空間を目指した、こだわりの機能。



患者さん自身が調節できる リクライニング機能。

ハンドスイッチ操作で、背もたれ・レッグレストの角度を調節可能。患者さん自身で操作いただけるため、より快適な姿勢へ調節できます。

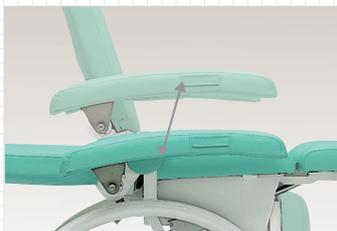

背もたれ・アームレストが連動して 安定した座り心地を生み出します。

背もたれを倒すのと同様に、アームレストも連動して水平に下がるため、自然な姿勢のままリクライニングできます。



患者さんに合わせて 角度調節ができるレッグレスト。

椅子状態からフラットなベッド状態まで、任意の位置での角度調節が可能です。かかとを支えてホールド感をより高めるステップタイプもご用意しています。
(写真はステップタイプ)



跳ね上げ式のアームレスト。

両サイドのアームレストはワンアクションで跳ね上げることができるので、車椅子等の横乗りの際もスムーズに乗り降りいただけます。



なめらかな手触りのレーザーを採用。

なめらかな感触のレーザー、さらにソフトな座り心地を実現するクッションシートを採用し、長時間の治療にも疲れにくい快適環境を追求しました。



簡単操作のハンドスイッチ。

簡単操作で背もたれとレッグレストをそれぞれ角度調節できます。また、背もたれとレッグレストの2つの操作スイッチを同時に押して調節することも可能です。

もっと安心を届けたい。もっと負担を減らしたい。〈ソフィール〉は、
 ドクターの患者さんへの思いをカタチにしたリカバリーチェア。
 「ソファでくつろいでいるような心地よさを」という発想で、チェアの隅々にまで
 快適さを高める機能と思いやりを求めました。やさしさにつつまれる、リカバリーのための時間と空間を創造します。

選べるタイプとカラーのバリエーション。

type & color variation



ステップタイプ (RL-SFNST)
 ステップが無いタイプ
 標準タイプ (RL-SFNT)



キャスターステップタイプ (RL-SFNS-CT)
 ステップが無いタイプ
 キャスタータイプ (RL-SFN-CT)



ワイドタイプ (受注生産)
 全幅を100mm広くしたワイドタイプも
 ご用意しております。



Yellow
(ES2)



Mint Blue
(ES5)



Rose Mist
(ES6)

使い勝手や快適さをさらに高めるオプションも充実。



テーブルデリバリー
(RL-SF-OPT-T)
 読書や小物置きに便利で、治療時間の快適性を高めます。



モニターデリバリー
(RL-OPT-MD)
 モニタープラケット
(RL-OPT-MD-BK)
 液晶モニターの角度を患者さんの見やすい
 位置に調節できます。長時間見ている
 も疲れにくいように配慮しました。
 (モニターは含みません)

テーブルデリバリーとモニターを同じサイドに取り付けることも可能です。詳しくはお問い合わせください。



バスケット
(RL-SF-OPT-B)
 患者さんのバッグや上着などの手荷物を置いていただく
 のに便利です。



イルリガートル架
(RL-SF-OPT-D)
 イルリガートル架はチェア本体の左右ど
 ちらにでも装着可能。空間がすっきりコン
 パクトにまとまり省スペースを実現しま
 す。


各種カバー

ソフィール用防水カバー
 (枕、シート、手すりのセット)
 ◆RL-SF-OPT-CT
 ◆RL-SF-OPT-C (ワイドタイプ用)

ソフィール用ステップカバー
 (ビニール素材のカバー)
 ◆RL-SF-OPT-SC


標準タイプ(RL-SFNT)

本体寸法	1610mm(最大長)×810mm×1245mm(最大高)
製品質量	62kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 180VA
操作電圧	DC24V

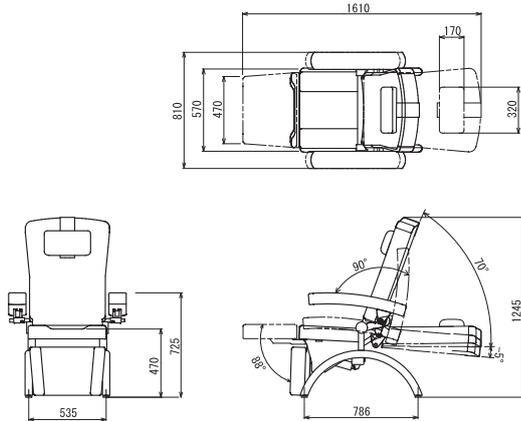


ステップタイプ(RL-SFNST)

本体寸法	1860mm(最大長)×810mm×1245mm(最大高)
製品質量	69kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 180VA
操作電圧	DC24V

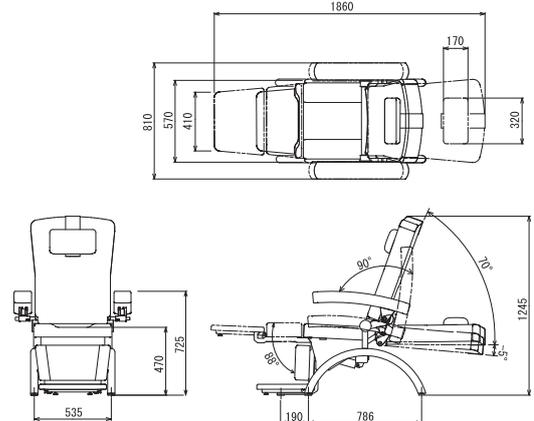


キャスタータイプ(RL-SFN-CT)

本体寸法	1610mm(最大長)×810mm×1245mm(最大高)
製品質量	65kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 180VA
操作電圧	DC24V

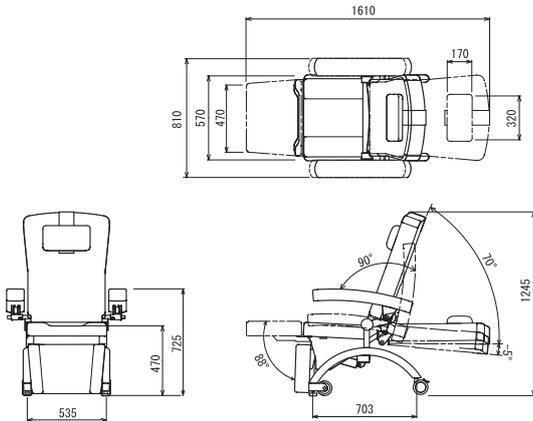

キャスターステップタイプ(RL-SFNS-CT)


本体寸法	1860mm(最大長)×810mm×1245mm(最大高)
製品質量	72kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 180VA
操作電圧	DC24V

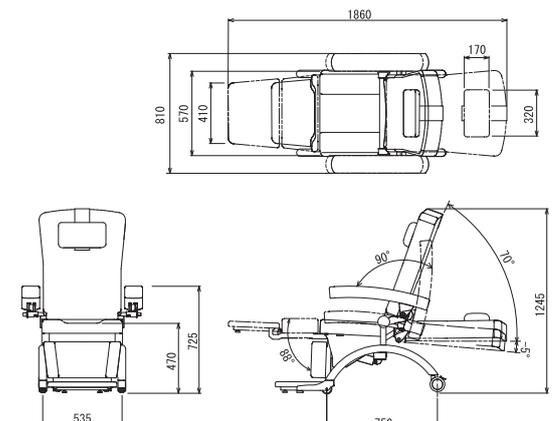

ワイドタイプ(受注生産)

全幅を100mm広くしたワイドタイプもご用意しております。

- ・標準タイプ(テスリ幅広)……………RL-SFN
- ・ステップタイプ(テスリ幅広)……………RL-SFNS
- ・キャスタータイプ(テスリ幅広)……………RL-SFN-CT
- ・キャスターステップタイプ(テスリ幅広)……………RL-SFNS-CT

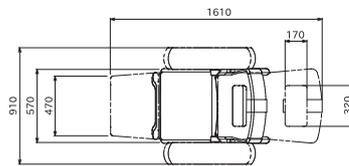

※図面はRL-SFN

販売名 ソフィール

製造販売届出番号 27B1X00042000002

タカラベルモント株式会社

大阪本社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

メディアカル事業部

札幌 (011)863-2139	仙台/盛岡 (022)231-3458	さいたま (048)640-5803
東京 (03)3401-9795	新潟 (025)333-8405	名古屋 (052)931-5163
金沢 (076)221-8412	大阪 (06)6211-5947	岡山 (086)233-8826
広島/高松 (082)277-6700	福岡 (092)474-7306	鹿児島 (099)226-9481

ショールーム

東京 東京都港区赤坂 7-1-19	(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋 2-1-1	(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	(098)897-6655



<https://me.takabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年2月現在のものです。

●お問い合わせ



50N 2502010.YA
YY-ME515