

ハイドリック ペイシェントスツール

DR-060HY

series

診療空間での
ユーザビリティを追求した
カタチがそこにある。



Features

ペダル操作で昇降でき

**患者さんが座った状態で
座面の高さ調整が可能**

ハイドリックポンプ式のペダル操作で座面の
高さ調整が行えるため、診療中でも患者さん
は座ったままで上昇/下降が可能です。
また、フット操作のため、スタッフは立ったまま
で高さを調整いただけます。



患者さんの身長差や
使用シーンに合わせて

**調整しやすい昇降
ストローク範囲(135mm)**

昇降ストローク(435~570mm)で、患者さん
の身長に合わせて高さを調整いただけます。
また、検査台などと組み合わせて使用する際
にも高さ調整しやすく、無理のない姿勢で
検査・診察いただけます。



Features

Line Up



しっかりと座れる広め＆フラットな座面形状

しっかりと腰かけやすい、広め＆フラットな座面形状。清掃のしやすさにも配慮しています。背もたれ付(DR-060HYB)も選択可能で、より安定感のある姿勢をサポートします。



フット操作で座面の回転ロックが可能

操作ペダルを上げることで、必要時に座面の回転をロックすることが可能です。操作ペダルは、乗り降りの際に脚と干渉しにくいよう、座面内に収まる設計としています。



すっきり＆安定感のあるベース周り

患者さんがつまずきにくいよう、薄くすっきりとしたベース形状で、足元を気にせずに着座いただけます。



DR-060HY

DR-060HYB
(背もたれ付)

Color Selection



ES7 (標準色)



ES5



ES19



ES2




ES10

Specifications

Dimensions

品番	DR-060HY	DR-060HYB
本体昇降機構	ハイドリックポンプ式(足踏み操作)	
シート昇降範囲	435～570mm	
製品質量	12kg	14kg

販売名：ペイシェントツールDR-060HY
製造販売届出番号：27B1X00042000093

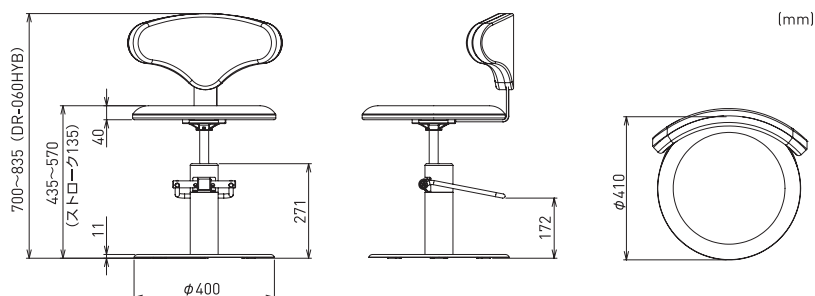

タカラベルモント株式会社

〔大阪本社〕 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

● メディカル事業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもあります。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年9月現在のものです。

お問い合わせ