

ルーパー
Looper

Concept

診察、処置、リカバリー、各
オプションとの組み合わせ

Recovery

リクライニングさせてリカバリーチェアに。
イルリガートル架の取り付けも可能です。
背ずれを抑えたシート形状で、
ゆったりとお過ごしいただけます。



各部屋をスムーズ

ルー
Loo

Transport

大型4輪キャスター搭載で移動もスムーズに。
それぞれの部屋へ移送する際の移動性の高
さを追求しました。



部屋への移送もこの一台で。
で多様なシーンで大活躍。

Examination

一般診療はもちろん、股受・汚水トレイ（バット受け）・カーテン架を取り付けると、碎石位への対応も可能。様々なオプションを組み合わせることで、多科目に対応した診察台としてご使用いただけます。

にループ(Loop)

ーパー

per

処置室


Treatment

上肢台を取り付けて処置台に。
腕の処置や、内視鏡検査・処置等、様々な処置に対応しています。
シート幅600mmでサイドからのアプローチにも配慮しています。

Features

スムーズなリクライニング操作

ガスシリンダーで操作をアシストします。
スリップレスバックシートの採用により、背モタレを起こすと腰部が沈み、患者さんの背ずれも抑えます。

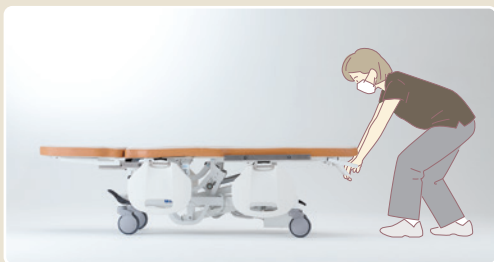

大型4輪キャスター採用で移送がスムーズ

トータルロック付キャスター

一度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切替可能です。
ロック時には回転と旋回の双方が固定され、安定感のある検査をサポートします。



カセット式リチウムイオンバッテリー

繰り返し充電に強く、長時間使用が可能な小型リチウムイオンバッテリーを採用。1回の充電で約100回の本体昇降が可能です（新品時）。バッテリー減少時にはLEDランプと警告音の両方でお知らせ。着脱簡単なカセット式バッテリーのため、交換・充電が楽に行えます。



乗り降り＆施術しやすい昇降機能

本体昇降スイッチに加えて2メモリーのプリセットスイッチを採用。高さ調整をアシストします。



プリセット(2ポジション)付きハンドスイッチ


本体昇降スイッチに加え、2メモリーのプリセットスイッチを採用。高さ調整をアシストします。また、シート横にハンドスイッチホルダーも用意し、収納場所にも配慮しました。

OPTION



プリセット(2ポジション)付きフットスイッチ

オプションのフットスイッチでも本体の昇降操作が可能です。

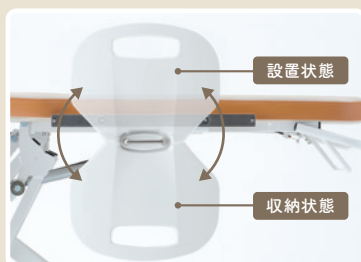

スペースを取らない回転式サイドフェンス(非導電性素材採用)

軽く引いて回すだけの回転式のため、スペースを取らずにフェンス操作することが可能です。



片手で操作できるワンハンドルロック機構搭載

フェンスは片手で操作可能です。
「設置状態」と「収納状態」位置で手を離すとロックが掛かります(内側から押してもロック解除されません)。

サイドレール搭載で様々なオプションの取り付けが可能

シートの両側にサイドレールを標準搭載。アームサポートや股受など、使用シーンに合わせてオプションを取り付けることができます。



応急処置を考慮した設計

心臓マッサージなど、荷重のかかる処置時にも配慮した強度を確保。



Option Customize

体位別オプションカスタマイズ例

側臥位

For 皮膚科、形成外科 処置

[使用オプション]

- ・上肢台
- ・側臥位用上肢台M
- ・枕(大)



仰臥位

For 外科・整形外科 処置

[使用オプション]

- ・透視用上肢台小型M
- ・スクリーン架



Option

オプション製品一覧



EB-BFT-M
枕



CR-LPR-M
枕(大)




EX-CS-AT
上肢台



CR-LPR-AS
アームサポート



DR-OPTM-G05
側臥位用上肢台M

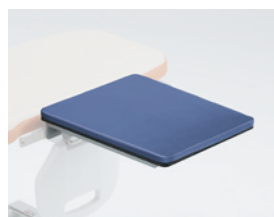

DR-OPTM-SIBK/SIAM
透視用上肢台小型M
※クッションなしタイプもご用意しています。
(DR-OPTM-SIA/SIB)



EX-CS-E
胸受け



EX-CS-EN
自在胸受け



CR-LPR-BH
酸素ポンプホルダー
(500L細型用)



EX-CS-BLM
スクリーン架



EX-CS-TD
多機能置き台




CR-LPR-KM
小物トレイ



CR-LPR-FK
フットスイッチ(小物トレイ付)



EB-BFT-SC
サイドフェンスカバー

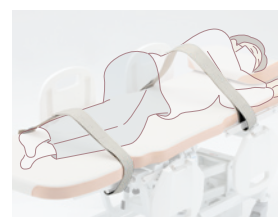


CR-LPR-B
体位保持ベルト

碎石位

For 婦人科、泌尿器科 診察

〔使用オプション〕

- ・股受
- ・汚水トレイ
- ・カーテン架
- ・フットスイッチ(小物トレー付)
- ・シートカバー
- ・枕(大)

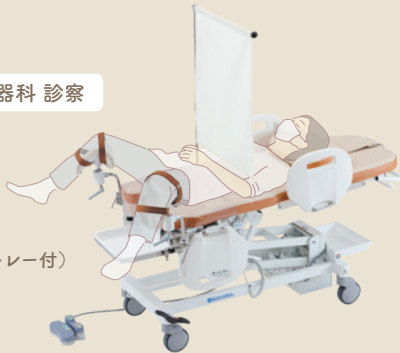

座位

For 点滴、リハビリ

〔使用オプション〕

- ・イルリガートル架
- ・アームサポート
- ・枕(大)



CR-LPR-CZ
股受




CR-LPR-CN
支脚器



DR-OPTM-KTEK
KTEK3100スターラップ
※クランプ、カートは別売です。



CR-LPR-CB
カーテン架

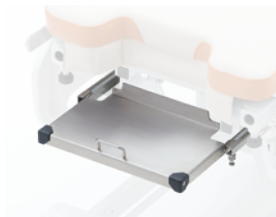

CR-LPR-BT
バット受け



CR-LPR-XT
汚水トレイ



クスコ掛け
※クスコ掛けの取り付けには、汚水トレイ
(CR-LPR-XT)が必要です。



CR-LPR-SC
シートカバー



CR-LPR-DC/CR-LPR-DC-BK
中央側イルリガートル架(取付ブラ
ケット1個付)／追加ブラケット



DR-OPTM-ZNN
イルリガートル架



CR-LPR-PH/DG-OPT-R35
ロールシートホルダー
／ロールシート



DR-070CHBP3
予備バッテリーパック
※充電器は含みません



追加キャストロックペダル

製品コード	販売名	製造販売届出番号
DR-OPTM-KTEK	KTEK3100スターラップ	14B1X00004000131
DR-OPTM-G05	側臥位用上肢台M	28B1X00012000032
DR-OPTM-SIBK/IAK	遠視用上肢台小型M	28B1X00012000047

※当カタログに掲載のないオプションの取り付けはできません。

Color Selection



ES9(アイボリー)×ES14(キャメル)
[標準色]



ES9(アイボリー)
×ES20(コーラルピンク)



ES9(アイボリー)
×ES23(アルドブルー)

抗菌・耐アルコール仕様の合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801 : 2012「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性



アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

Specifications

製品コード	CR-LPR
本体寸法	600mm×1850mm(テーブルトップ寸法)
本体昇降範囲	500mm～930mm(電動ギアモータ式)
サイドフェンス	回転収納式
キャスター	直進ロック、4輪ロック、4輪フリー切替え式

電気定格	DC21.6V 130VA
質量	93kg
主な構成	ハンズスイッチ1個、バッテリーパック1個、充電器1セット
製造販売届出番号	27B1X00042000092
販売名	ルーパー

Dimensions

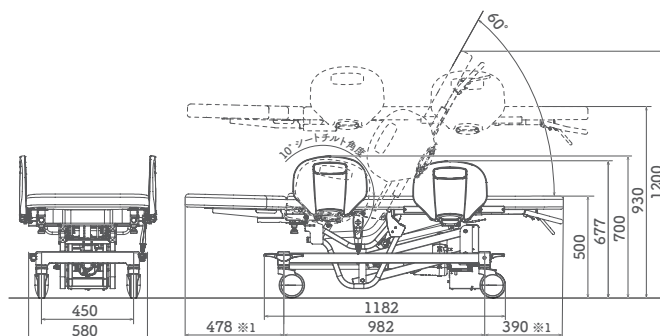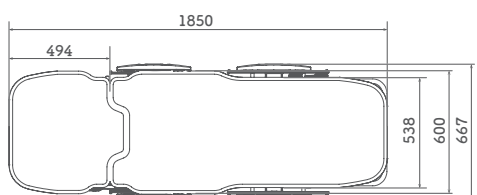

単位 [mm]

※1 本体高さが初高のときの寸法です。本体高さによって異なります。

TAKARA BELMONT DESIGN WORKS

タカラベルモントの医院空間づくり

設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。




Instagram

タカラベルモント メディカル事業部公式

施工事例やお役立ち情報を発信中♪

@takara_designworks_medical

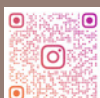

タカラベルモント株式会社

〔大阪本社〕 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年10月現在のものです。

お問合せは