

| 分娩台 |

DG-JN900



DELIVERY TABLE

シンプルスタイルの汎用型分娩台に、 介助しやすさとやさしさをプラス

ベーシックな操作感はそのままに、医療スタッフの介助性向上と、
産婦さんへのやさしさを実現しました。

陣痛期／回復期

産婦さんの
乗り降りに配慮した
最低位580mm



分娩期

介助しやすい高さに
調節できる
最高位1,000mm



さまざまな“姿勢”に対応できるフレキシブル支脚器

操作性の高い支脚器で
簡単セッティング



産婦さんの体型に合わせて支脚位置と開脚幅の調節を
2ステップで行うことができ、いきみやすい位置に
調節可能です。

踵受けから股受けへの
移行もスムーズ



踵受け

股受け

介助しやすさを追求

メモリー機能付き 電動スライド式補助台



ワンタッチで最大幅・最小幅へ移行できるオート動作に加え、よく使うスライド幅のメモリー機能も搭載しています。

骨盤誘導線を調整できる 腰板昇降



フットスイッチ操作で腰板を上下昇降させることができ、分娩状況に合わせた腰板の調整が可能です。

ワイヤレスフットスイッチで 足もとスッキリ



赤外線が360°送信され、操作時の配置や向きが自由度がアップ。




■よく使う姿勢にオート動作で
移行可能なプリセット機能*



ワンタッチで移行でき、
ボタンを押し続ける必要がありません。

*本体プリセットは本体高さ・背もたれ角度、補助台プリセットはスライド幅をメモリーできます。

本体からの操作も可能な サブスイッチ

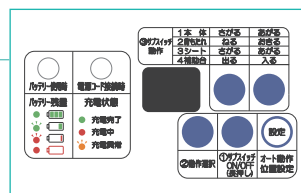

バッテリー搭載

AC電源なしでも約1時間、本体動作が可能です（満充電時）。バッテリー残量はLEDランプで確認できます。

搬送を考慮した設計

大型4輪キャスター搭載



産婦さんを分娩台に乗せたまま搬送が可能です。キャスターは、一度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切替ができます。

回転式サイドフェンス



回転式のため省スペースで収納でき、ストレッチャーの横付けも可能です。

OPTIONS



ハンドスイッチ
DG-JN900-HSWN



分娩台マット
DG-JN900-GM



搬送用ハンドル
DG-JN900-TH



酸素ボンベホルダー
DG-JN900-BH



防水パイルカバー
DG-OPT-JN900PB/PL/PM



枕



サイドレール/イリリガートル架
DG-JN900-SR/DR-OPTM-ZNN

COLOR SELECTION



ES19
ベビーピンク(標準色)



ES17
フロスグリーン





ES9
アイボリー



ES2
イエロー

SPECIFICATIONS

寸法図[mm]

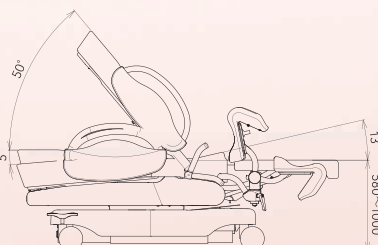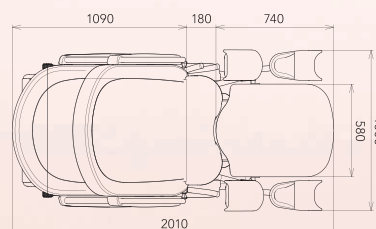

[仕様]

製品コード	DG-JN900
電気定格	AC100V 50/60Hz 520VA
質量	355kg
主な構成	フットスイッチ1個、電源コード1本、シートカバー1枚、ステンレスパット1個、窓責グリップ1組
製造販売届出番号	27B1X00042000077
販売名	分娩台 DG-JN900

作動(運転モード)・・・非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1:5

※デューティサイクル:油圧モーターの連続作動時間に対する休止時間の比率
(ただし、環境温度により異なります。)



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、
もちろん健康になってほしい、そしてなによりその尊厳が守られてほしい。

その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルモント、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの詳細はこちらから
<https://whc-takara.jp>

タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

<https://me.takarabelmont.co.jp>

営業所

札幌 (011)863-2139
新潟 (025)333-8405
広島/高松 (082)277-6700

仙台/盛岡 (022)231-3458
名古屋 (052)931-5163
福岡 (092)474-7306

さいたま (048)640-5803
金沢 (076)221-8412
鹿児島 (099)226-9481

東京 (03)3401-9795
大阪 (06)6211-5947

横浜/静岡 (045)523-7010
岡山 (086)233-8826



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。●このカタログは2025年9月現在のものです。

30E250900510P
YY-ME241