

シャンプータイムを快適に。
身体を包みこむような寝心地のシャンプーチェア。

ハンモックスタイル採用！



乗り降りしやすい 最低位 555mm

足元がすっきりとしたデザインで、スムーズな乗り降りをサポートします。




やさしく身体を包み込むような寝心地

シートや背もたれの芯材に適度に伸縮性のあるシートサスペンション材を使用。背もたれにはやわらかさのあるウレタンモールドクッションを採用し、ハンモックのように患者さんの身体の凹凸に合わせ、やさしく包み込むようにフィットします。



背ずれを軽減する リクライニング機構

背もたれの回転支点を人間の腰の回転支点に近づけ、リクライニング時の背ずれや腰の浮きなどの違和感を軽減します。

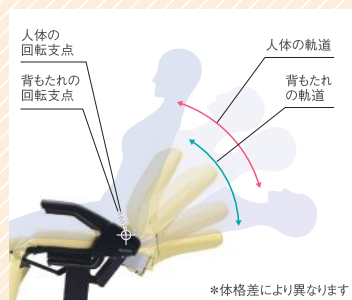

医療機器へも採用されている抗菌・耐アルコール仕様の合成皮革

●抗菌性

JIS Z 2801:2012「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌試験を実施。



●耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。

※当社基準に基づく



スタッフさんにうれしい、日々のワークをスムーズにする機能を搭載。

Meving
シャンプーチェア メビング

左右のどちらからでも洗髪可能な コード付きフットスイッチ

スイッチを押している間、背もたれ・レッグレスト・本体昇降が連動して動き、椅子状態からシャンプー姿勢への移行がスムーズに行えます。また、本体から独立したコード付きのフットスイッチのため、左右のどちらからでも洗髪可能です。



車椅子の入出時や 清掃時に移動できる キャスター搭載(ロック付)




Specifications

■仕様

品番	DR-MS-C
外形寸法	W595×D750~1170×H930mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	330/400W
質量	55kg


■設置寸法図

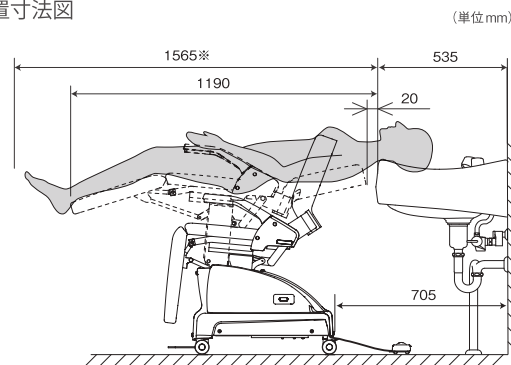

※身長170cm程度の方が寝た場合の参考値です。長身の方の場合は余裕をみて設置してください。

■寸法図

(単位mm)

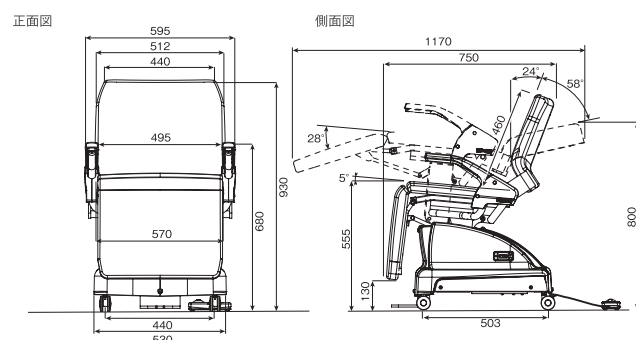

Color Selection



患者さんにとっても、スタッフさんにとっても快適なサイドシャンプーを

サイドシャンプーボウル 【マジョリカボルト】

MAJOLICA PORTO


▶広く使いやすいボウルデザイン



シャンプーボウル
EX-SB 2W
水栓金具セット
EX-SB P(S)2
外形寸法: W640×D535×H240mm
ボウルカラー: ホワイト[W]

※マジョリカボルトは陶器製のため
製品ごとに形状のバラツキ等が
ございますので、予めご了承ください。

▶患者さんにやさしい設計

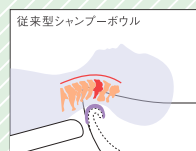

ネッククッションと首との接触面が首中央部のみに限定的。



厚みのある柔らかなジェルクッションが首の付け根まで幅広くサポートでき、首への負担を軽減。



●ボウルカラー



リラクゼーションビロー Shampoo Revolution



耐水性・耐薬性に優れた海外の特殊スポンジと塗料を使用した非常にソフトなネッククッション。

サイズ: 約 W190×D110×H80mm
／サイドシャンプー用

タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620 <https://me.takabelmont.co.jp>

営業所

札幌 (011)863-2139
新潟 (025)333-8405
広島/高松 (082)277-6700

仙台/盛岡 (022)231-3458
名古屋 (052)931-5163
福岡 (092)474-7306

さいたま (048)640-5803
金沢 (076)221-8412
鹿児島 (099)226-9481

東京 (03)3401-9795
大阪 (06)6211-5947

横浜/静岡 (045)523-7010
岡山 (086)233-8826



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。●このカタログは2025年10月現在のものです。

50C25100030P
YY-ME446