

外科用手術台

DR-2600 SERIES

外科用手術台

DR-2600 SERIES




必要とされる機能を厳選し、シンプルを追い求め生まれた手術台のスタンダードモデル。

現場の声を活かし、選び抜かれた機能で、各科の手術に対応します。

— クオリティーもプライスも大切にしたい —

そんな思いから誕生したのがDR-2600シリーズです。

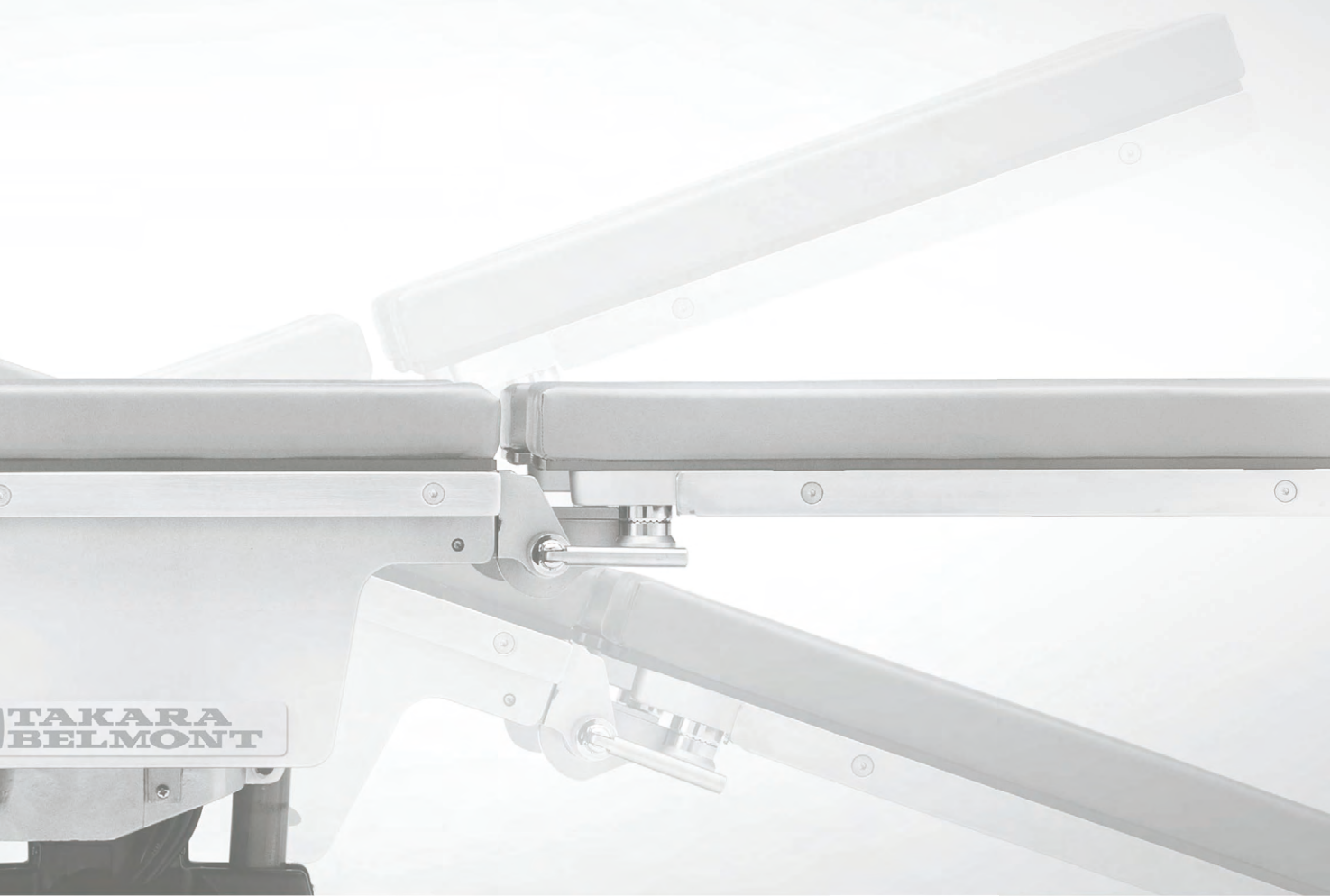

POSITIONS & OPERATIONS

- ☐ 碎石位 (支脚器別売)
- ☐ ジャックナイフポジション
- ☐ 脚板屈折・開脚




- ☐ 縦転位



- ☐ 横転位



- ☐ 背板屈折

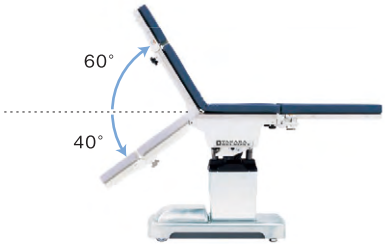

※ テーブルトップスライドタイプは
上方65°、下方30°

FEATURES



枕板・脚板の差し替えが可能

各科手術に柔軟に対応

枕板と脚板を差し替える事で、外科手術対応においてより広い足元スペースと透視領域を確保できます。



背板屈折仕様

一般外科・耳鼻科・眼科・皮膚科・美容形成外科など



腰板屈折仕様

一般外科・産婦人科・泌尿器科など

腰板から脚板下部に広いクリアランスを確保し、C-アームによるイメージング、碎石位のポジショニングが容易に行えます。




テーブルスライド

Select DR-2600V-S・DR-2600V-SY

より広い透視領域を確保


背板屈折仕様

テーブルトップが頭方向に20cm、脚方向に10cmスライドします。

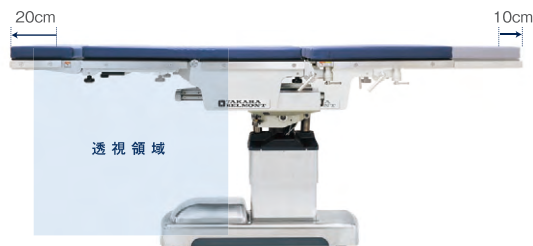

腰板屈折仕様

テーブルトップが頭方向に10cm、脚方向に20cmスライドします。

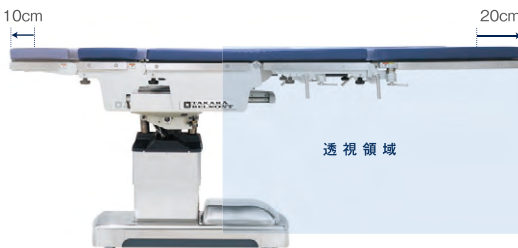


※背板屈折仕様、腰板屈折仕様共に、テーブルトップスライド時本体中央で一時停止します。



バッテリー搭載

Select DR-2600V-Y・DR-2600V-SY

繰り返し充電に強く、長時間使用が可能※なりチウムイオンバッテリーを採用。本体ベース部にバッテリー残量が目でわかるパネル表示を設けています。
※鉛蓄電池比(当社従来製品)

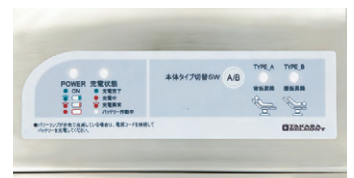

水平復帰・水平一時停止

テーブルトップのワンボタンによる水平復帰機能を装備し、術後の水平への移行がスムーズに行えます。縦転・横転・背板(腰板)の作動においては、水平一時停止機能を装備し、ポジション変換、水平確認が容易に行えます。



FUNCTIONS


□カセットレール内蔵

半切まで使用でき、術中撮影が効率よく行なえます。



□緊急停止スイッチ

緊急時に作動を停止させます。

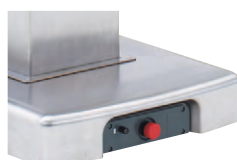

□低電圧リモートコントロールスイッチ

安全性を考慮したDC5Vのメンブレン仕様低電圧リモートコントロールスイッチを採用し、誤操作防止の"E"スイッチも装備。



□本体固定

電動油圧式アジャスターロック機構を採用し、操作性を向上させました。

VARIATIONS

プラグイン

□ DR-2600シリーズのベーシックモデル
DR-2600ZV



※DR-2600ZV-F(脚板一枚仕様)

スライド

□ テーブルトップスライドモデル
DR-2600V-S



※DR-2600V-SF(脚板一枚仕様)

バッテリー搭載型

☐ バッテリー搭載ベーシックモデル
DR-2600V-Y



※DB-2600V-YF(脚板一枚仕様)

☐ バッテリー搭載テーブルトップスライドモデル
DR-2600V-SY



※DR-2600V-SYF(脚板一枚仕様)

※脚板一枚仕様もバリエーションとして設定しています。


SPECIFICATIONS

DR-2600 Series 仕様一覧 販売名:外科用手術台DR-2600 製造販売届出番号:28B1X00012000003


	DR-2600ZV ベースック	DR-2600V-Y バッテリー	DR-2600V-S スライド	DR-2600V-SY スライドバッテリー
テーブルトップ寸法	W500×L2,063mm			
ベース寸法	W495×L935mm			
質量	220kg	240kg	250kg	270kg
電気定格	100V 50/60Hz 5.0A	100V 50/60Hz 6.0A	100V 50/60Hz 5.0A	100V 50/60Hz 6.0A
バッテリー電圧	—	DC25.2V	—	DC25.2V
本体移動／固定	電動油圧式アジャスターロック機構			
本体昇降範囲（電動油圧式）	700—1,000mm（クッションは除く）		730～1,030mm（クッションは除く）	
本体縦転角度（電動油圧式）	頭上方30°、頭下方30°			
本体横転角度（電動油圧式）	右上方20°、左上方20°			
背板屈折角度（電動油圧式）	上方60°、下方40°		上方65°、下方30°	
スライド（電動油圧式）	—		枕側200mm、脚側100mm（背板屈折仕様時）	
水平一時停止機構（電動油圧式）	縦転、横転、背板昇降動作			
水平復帰機構（電動油圧式）	縦転、横転、背板昇降動作			
枕板屈折角度（手動）	上方30°、下方90°			
脚板屈折角度（手動）	上方0°、下方90°			
脚板開脚角度（手動）	右方90°、左方90°			
主な構成	ハンドスイッチ1個、電源コード1本			

DIMENSIONS

DR-2600ZV (ベーシック)
DR-2600V-Y (バッテリー)

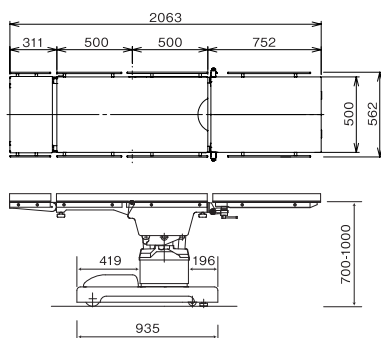

DR-2600V-S (スライド)
DR-2600V-SY (スライドバッテリー)

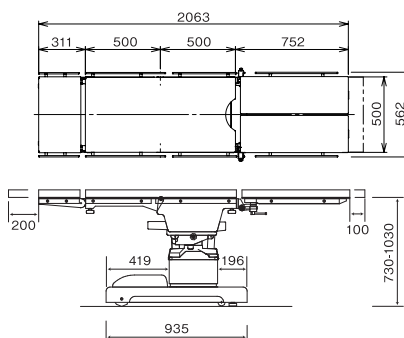

ACCESSORIES

□ 上肢台



製品コード: DR-OPTM-AT
販売名: 上肢台M
製造販売届出番号:
28B1X00012000019

□ 側臥位用上肢台




製品コード: DR-OPTM-G05
販売名: 側臥位用上肢台M
製造販売届出番号:
28B1X00012000032

□ 自在胸受け



製品コード: DR-OPTM-EN05
販売名: 自在胸受けM
製造販売届出番号:
28B1X00012000029

□ スクリーン架L型+門型

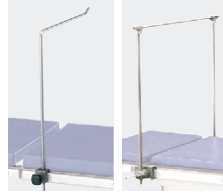

製品コード: DR-OPTM-BL05
販売名: スクリーン架L型M
製造販売届出番号:
28B1X00012000021


製品コード: DR-OPTM-BN05
販売名: スクリーン架門型M
製造販売届出番号:
28B1X00012000023

□ 支脚器




製品コード: DR-OPTM-CN05
販売名: 支脚器M
製造販売届出番号:
28B1X00012000026

□ 透視用上肢台小型

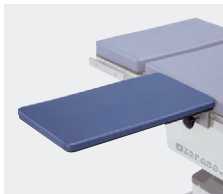


製品コード: DR-OPTM-SIAK/SBK
販売名: 透視用上肢台小型M
製造販売届出番号:
28B1X00012000047

□ アームシールド

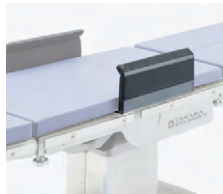


製品コード: DR-OPTM-AS2

□ カセットトレイ

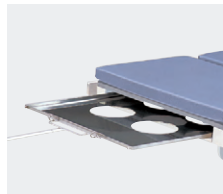

製品コード: DR-OPTM-J

□ 枠付汚水ロート

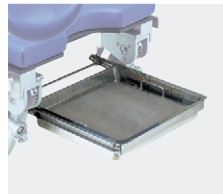

製品コード: DR-OPTM-X20/X78/X26S

※手術台機種によりコードが異なります。
詳細は弊社営業担当へお問い合わせ
ください。

□ KTEK3100スターラップ



製品コード: DR-OPTM-KTEK
販売名: KTEK3100スターラップ
製造販売届出番号:
14B1X00004000131
※クランプ、カートは別売です。

STOOLS

□ LS-007GSB



ガスシリンダー式

□ LS-009GS



ガスシリンダー式
※背もたれはオプションです。
(LS-OPT-SB)

□ LS-150HY



ハイドリックポンプ式
※背もたれはオプションです。
(LS-OPT-SB)

□ LS-SDLGS



ガスシリンダー式

□ LS-SDLHY



ハイドリックポンプ式

タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
東京 (03)3401-9795	広島/高松 (082)277-6700
横浜/静岡 (045)523-7010	福岡 (092)474-7306
新潟 (025)333-8405	鹿児島 (099)226-9481
名古屋 (052)931-5163	

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://me.takarabelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年7月現在のものです。

●お問い合わせ

