

Ophthalmological Equipment

General catalog

[眼科総合カタログ]

眼科用手術台

MEPRO 5N メプロ5N

[DR-150N]


耳側切開時のポジショニングと周辺機器を含む
レイアウト変更の容易さを目指した眼科用手術台




耳側切開手術時の膝干渉を極限まで少なく

ヘッドレスト昇降及びチルト機構のモーター化により、当社従来製品よりもバックレストとヘッドレストが薄くなり、耳側切開手術時の膝干渉がさらに少なくなりました。スリムでフラットなバックレストは、より快適な手術姿勢を提供します。

メプロ4

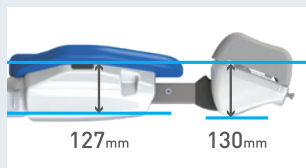


メプロ5

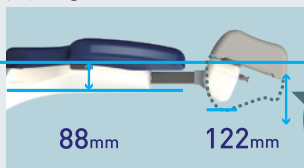

先端部
(下部含む)
を60%
大幅カット
※

※メプロ4のヘッドレスト容積との比較

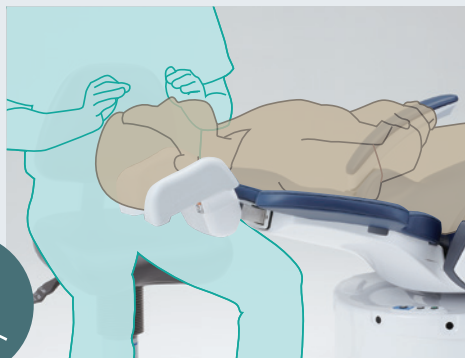


軸回転機構の搭載により、耳側切開時のレイアウト変更の作業効率がUP


軸回転機構により、耳側切開時の左右眼のポジショニングに合わせたレイアウト変更がよりスムーズに行えます。

左右90°の回転範囲

ロック解除時に昇降部を中心とした回転が可能です(手動操作)。範囲内の任意の位置で回転ロックできます。

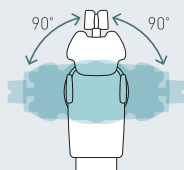

回転解除/ロックスイッチを押すごとに、回転機構のロック/ロック解除が切り替わります。

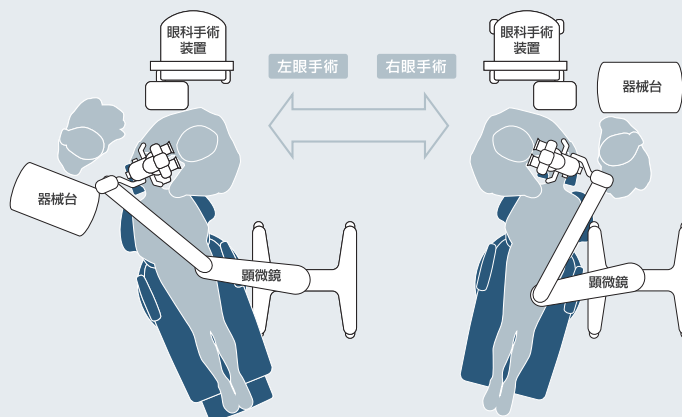

従来機種より可動角度が増加した枕傾起機能

従来機種より前傾10°、後傾5°可動角度が増えたことで、眼部の角度調節がよりスムーズになります。



頭をしっかりホールドする左右分割式ヘッドレスト

ヘッドレストは両手で頭を包み込むような形状。2面で支えるため、頭の横揺れを軽減します。



円背患者さんへの対応に配慮したヘッドレスト昇降機構を採用

ヘッドレストは両手で頭を包み込むような形状。
2面で支えるため、頭の横揺れを軽減します。




充電式フットスイッチ

バッテリー残量は4段階のランプで表示。
万が一充電が切れてしまった際も、接続ケーブルを
使用して有線フットスイッチとして使用可能です。



縦型&コードレスフットスイッチ で足元スッキリ

縦型で他のフットスイッチ
と並べやすく、コードレス
仕様により足元もすっきり
保てます。

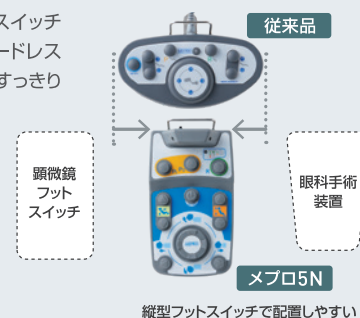

縦型フットスイッチで配置しやすい

移動時に便利な電動昇降フリーキャスター

移動時には電動で本体をリフトアップ。
4輪フリーキャスターを採用しているため前後左
右に移動可能。レイアウト変更や部屋間の移動も
容易に行えます。

本体固定スイッチ



本体移動スイッチ



フリーキャスター



頭がズレにくい&用途に合わせた リクライニング機構

オート動作時はリクライニングと連動して
ヘッドレストが引き込まれ、頭部のズレを抑
制。患者さんの位置補正頻度を低減します。
マニュアル動作では低速駆動により
微調整が可能です。



ACCESSORIES

手術をサポートするアクセサリ部品。

リストレスト(5N用)【DR-150R】



円背対応時のヘッドレスト昇降
に追従するため、高さ調整の手
間が軽減されます。脱着もより
容易になりました。
(当社従来製品比)

上肢台【DR-150AM】



サイドレール取付式のため、患
者さんの体格差に合わせて位
置調整が行えます。

ヘッドレストカバー【DR-MEPRO-HC】(ディスボーズアルタイプ)



使用した消毒液、洗浄水等
からの汚れを防止します。

COLOR SELECTION



標準色 ES23
アルドブルー



ES2
イエロー



ES7
オーシャンブルー



ES8
ブラック



ES10
ライトブラウン






ES15
ライトグリーン



ES16
パープルブルー

※ES23以外は
受注生産になります。

製 品 コ ー ド	DR-150N
本 体 昇 降 範 囲	485~770mm 電動油圧式
バックレスト寝起範囲	0~74° 電動油圧式
ヘッドレスト伸縮量	170mm 電動モーター式
ヘッドレスト縦転角度	50° 電動モーター式
電 気 定 格	AC100V 50/60Hz 4.1/4.5A
製 品 質 量	155.6kg
主 な 構 成 品	フットスイッチ1個(充電用接続ケー ブル1本付き)、電源コード1本
製造販売届出番号	27B1X00042001046
販 売 名	メプロ5

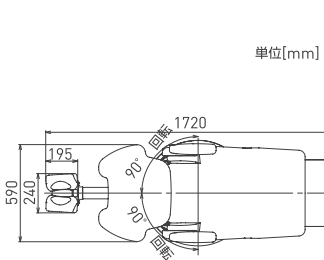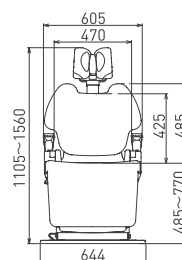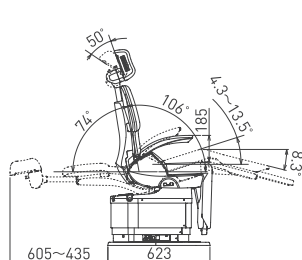

単位[mm]

眼科用手術台

MEPRO 5NPlus メプロ5N プラス
[DR-150NP]


メプロ5Nの機能を継承しつつ
ヘッドレスト横転機能を搭載し
術野確保をより進化させた眼科用手術台




※写真の本体カラーはES8(ブラック)です。

ヘッドレスト横転機能を搭載 術野確保をより進化

横転機能を使い頭部に傾斜を加えることで、術野の展開が促進され、器具のアプローチ性が向上します。術者の操作環境が整うことで、精密な処置の進行をサポートします。

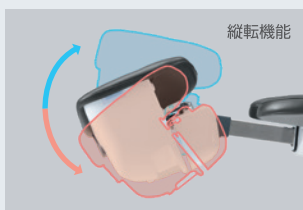

左右各30°の横転駆動が可能。
縦転機能と組み合わせること
で、術中に患者さんに触れるこ
となく、頭部を前後(うなずく動
き)左右(首を振る動き)方向に
調整することが可能です。

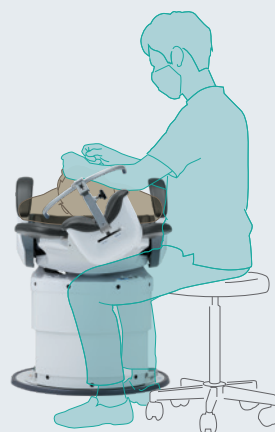

ACCESSORIES 手術をサポートするアクセサリ部品。

リストレスト(5N Plus用) [DR-150NPR]



円背対応時のヘッドレス
ト昇降に追従するため、
高さ調整の手間が軽減
されます。脱着もより容
易になりました。
(当社従来製品比)

サイドサポート [DR-150NPSS]



横転駆動時にも、やさし
く頭部を支えるサイド
サポート。頭部の安定を
サポートし、患者さんに
安心感をもたらします。

上肢台 [DR-150AM]

ヘッドレストカバー [DR-MEPRO-HC]
(ディスプレイタイプ)

COLOR SELECTION

標準色 ES23
アルドブルー



ES2
イエロー



ES7
オーシャンブルー



ES8
ブラック



ES10
ライトブラウン



ES15
ライトグリーン






ES16
パープルブルー



※ES23以外は受注生産になります。

製品コード	DR-150NP
本体昇降範囲	485~770mm 電動油圧式
バックレスト寝起範囲	0~74° 電動油圧式
ヘッドレスト伸縮量	170mm 電動モーター式
ヘッドレスト縦転角度	50° 電動モーター式
ヘッドレスト横転角度	左右各30° 電動モーター式
電気定格	AC100V 50/60Hz 4.1/4.5A
製品質量	157kg
主な構成部品	フットスイッチ1個(充電用接続ケーブル1本付き)、電源コード1本
製造販売届出番号	27B1X00042001046
販売名	メプロ5

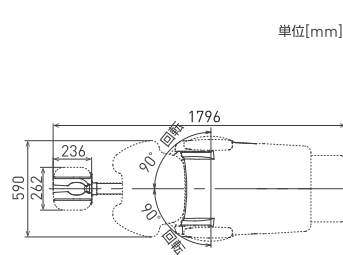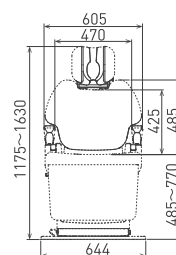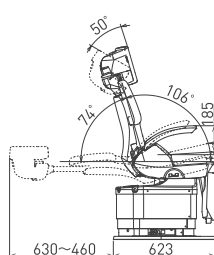

単位[mm]

眼科用手術台

MEPRO IV メプロ4

[DR-140]

患者さんの緊張感や不安感をより少なく、
ドクターやスタッフにはもっと使いやすく



患者さんの身長差を吸収するバックレスト&ヘッドレストのスライド機構

バックレストを従来品より短くし、小柄な患者さんに合わせやすくなりました。
また、大柄な患者さんに合わせられるよう、バックレストのスライド機構を採用しています。




移動時に便利な電動昇降フリーキャスター

移動時には電動で本体をリフトアップ。4輪フリーキャスターを採用しているため前後左右に移動可能。レイアウト変更や部屋間の移動も容易に行えます。

頭をしっかりホールドする 左右分割式ヘッドレスト

ヘッドレストは両手で頭を包み込むような形状。2面で支えるため、頭の横揺れを軽減します。

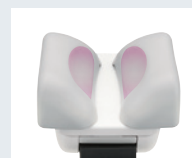

首の動きに合わせ自然な角度調整ができる ヘッドレスト

ヘッドレストの傾斜と伸縮を連動させることで、首の動きに合わせた自然な動きを実現しました。



ACCESSORIES

手術をサポートするアクセサリ部品。

リストレスト [DR-140R2]



着脱が容易に行えます。



上肢台 [DR-140AM1]



ヘッドレストカバー [DR-MEPRO-HC]
(ディスボーズタイプ)



COLOR SELECTION

標準色 ES7
オーシャンブルー



ES2
イエロー



ES10
ライトブラウン



ES15
ライトグリーン



ES16
パープルブルー




ES23
アルドブルー



※ES7以外は受注生産になります。

製品コード	DR-140
本体昇降範囲	465~730mm 電動油圧式
バックレスト寝起範囲	0~80° 電動油圧式
バックレストスライド量	100mm 手動式
ヘッドレスト伸縮量	150mm 電動油圧式
ヘッドレスト縦転角度	35° 電動油圧式
電気定格	AC100V 50/60Hz 4.5/5.0A
製品質量	157kg
主な構成部品	フットスイッチ1個、電源コード1本
製造販売届出番号	27B1X00042001037
販売名	メプロ

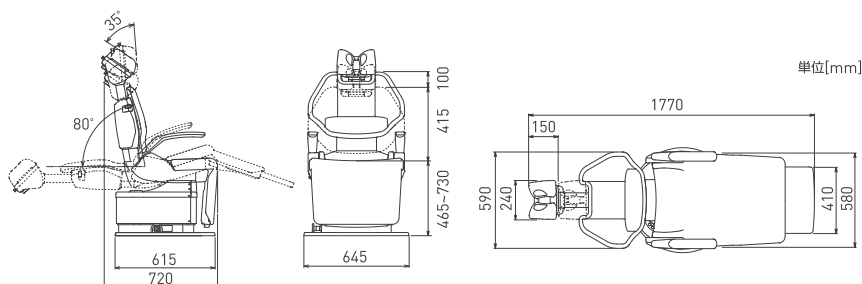

眼科用手術台

JST-N

DR-JST用コラム

【DR-JST-A2J】

DR-JST用テーブルセット

【DR-JST-BN】

DR-JST用ストレッチャー

【DR-JST-C】



マイクロサージェリー手術の大幅な効率化・省力化を実現した
分離型眼科用手術台



足元のスペースを十分に確保できるコンパクト設計です。



テーブルトップの昇降範囲は64cm～89cmと広範囲です。



搬送ストレッチャーは、軽量かつ耐久性を重視した使いやすい設計で、術前・術後の移動に便利です。



ヘッドレストは、上方向に8cm・下方向に7cm昇降、前後に各25°の縦転が可能です。

製造販売届出番号	27B1X00042000033
販売名	眼科用手術台 DR-JST-N


処置室 TREATMENT ROOM

眼科治療椅子


MEPRO Jr. メプロジュニア

【DR-110JR】

診察空間の省スペース化にも役立つ外来診療に適した眼科治療椅子

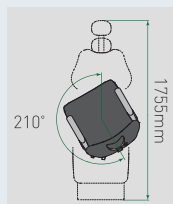

本体回転機構により診察空間の省スペースに役立ちます。

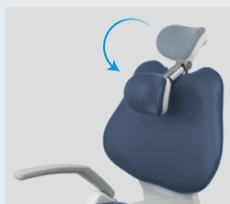

お子様や様々な体型の患者さんにも対応できる、手動式の2関節ヘッドレストを採用しました。




電動油圧制御により、スムーズな作動を実現。治療ポジションへの移行が円滑に行えます。

お子様もお年寄りも
乗り降りしやすい
初高48cm。



製品コード	DR-110JR
本体昇降範囲	480～725mm 電動油圧式、フットスイッチ操作
バックレスト寝起範囲	0～80° 電動油圧式、フットスイッチ操作
ヘッドレスト上下機構	手動式
ヘッドレスト角度調節機構	手動式
本体回転機構	210°回転(手動式)
電気定格	AC100V 50/60Hz 3.6/3.8A
製品質量	158kg
主な構成	フットスイッチ1個、電源コード1本
製造販売届出番号	27B1X00042001016
販売名	眼科治療椅子 メプロジュニア

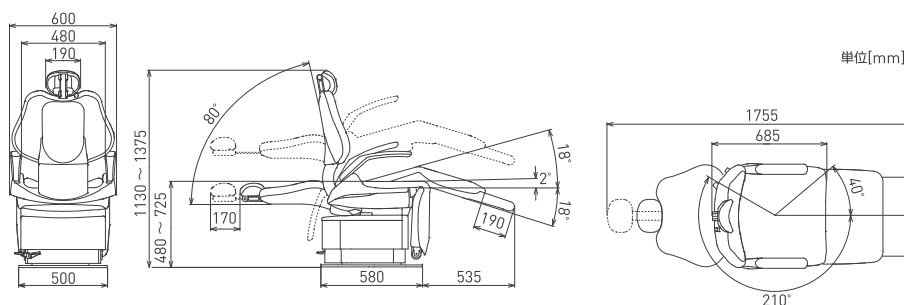

ドクターズツール

LS-150 Type

眼科診療をサポートする高機能で高品質なツール

“選べる”昇降ベース

CH

電動昇降式 [バッテリー駆動]

術者が着座したまま上昇/下降のフット操作が行えます。高さの微調節も電動のためよりスムーズです。



HY

ハイドリックポンプ式

術者が着座したまま上昇/下降のフット操作 [踏み込み式] が可能です。



“選べる”シートタイプ

丸型

丸型シート

使い方を選ばない、スタンダードな丸型シート。

角型

角型シート&背もたれ

[シートと背もたれのチルト機構付]

サイドのチルト用レバーでシートと背もたれをお好みの角度に調節可能です。

“選べる”Option



バー型背もたれ LS-OPT-SB

回転可能なバー型背もたれ。



丸型背もたれ LS-OPT-MB

背中を面で支え、より広範囲をサポートします。(回転不可)



アームレスト LS-OPT-AR

高さと前後位置が調節可能なアームレスト。クッション付で腕をやさしくサポートします。



LS-150CHKB

CH



OPTION



LS-150CH

CH



OPTION



LS-150HY

HY



OPTION



LS-150HYKB

HY



OPTION



品 番	タイプ		シート昇降範囲	製品質量	オプション		
	ベース	シート			バー型背もたれ LS-OPT-SB	丸型背もたれ LS-OPT-MB	アームレスト LS-OPT-AR
LS-150CHKB※1	電動昇降式(フットレバー操作) フットロック(1ヶ所)付	角型シート(シート・背もたれチルト機構付)	490mm~630mm	22kg	-	-	○
LS-150CH※1		丸型シート	460mm~600mm	16kg	○	○	○ ※2 ※3
LS-150HYKB	ハイドリックポンプ式(足踏み操作) フットロック(1ヶ所)付	角型シート(シート・背もたれチルト機構付)	480mm~680mm	22kg	-	-	○
LS-150HY		丸型シート	460mm~660mm	15kg	○	○	○ ※2 ※3

※1…電動昇降式のため、シートは回転しません。 ※2…バー型背もたれ(LS-OPT-SB)との組み合わせはできません。 ※3…丸型背もたれ(LS-OPT-MB)と組み合わせない場合は取付金具(別途費用)が必要です。

ガスツール

LS-SDLGS

長時間の着座による負担軽減に
努めたサドル型のシート

シート角度調節機能

姿勢に合わせて角度が調節でき、座り心地をさらに向上させます。



本体昇降機構	ガスシリンダー式 (フット操作)
シート昇降範囲	585mm~780mm
製品質量	12kg



ガスツール

LS-009GS

スタンダードなタイプのガスツール

■ Option



バー型背もたれ LS-OPT-SB

本体昇降機構	ガスシリンダー式(フット操作)
シート昇降範囲	505mm~700mm
製品質量	8kg(背もたれ無し)



スライドテーブル

TS1

当社独自のオフセットデザインの採用により、先生方、患者さんの膝まわりのパーソナルスペースを広々と確保しました。




※ペイシェントスツールは別売です。
※スリットランプは当社製品ではありません。

オフセットデザイン

広々とした足元空間。

先生方、患者さんにやさしい診療空間を提供します。

車椅子でも導入しやすい

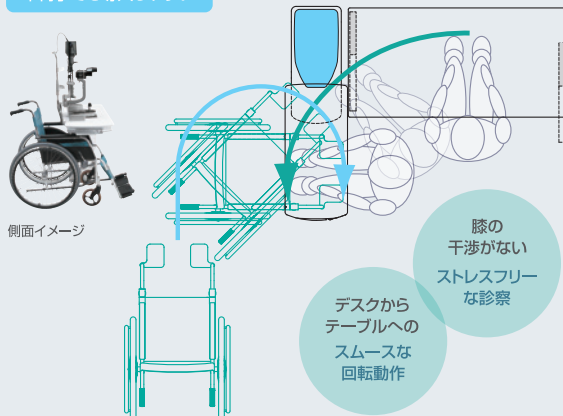

ワンレバー操作可能

テーブル操作はすべて

ワンレバー操作で行えます。

ワンレバースイッチのため、4方向の操作が感覚的に行えます。



テーブルスライド:

レバーの押し、引きで操作します。

500mm
① ← ② →



テーブル昇降:

レバーの上げ、下げで操作します。

925mm ③


660mm ④



オートスライド

1.5秒以内にツークリック操作でオートスライドします。
※ワンクリック操作及び長押し操作に変更可。
また、オートスライド時の動作スピードは設定可能です。

製品コード	DR-TS1N
電気定格	AC100V 50/60Hz 4.2/4.9A
製品質量	120kg (検眼鏡ケース付仕様は+3kg)
許容最大荷重	300N (30kgf)
主な構成	電源コード 1本
製造販売届出番号	27B1X00042001033
販売名	眼科スライドテーブル

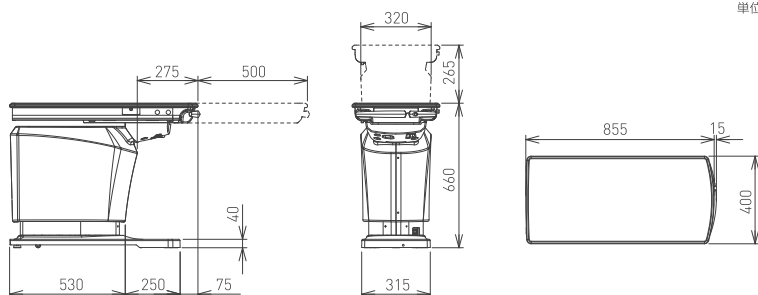

単位[mm]

DR-070X Series

用途やニーズに合わせて選べる座面とベース



スムーズに座面の高さを調整する 昇降ストローク・スピードUP

当社従来製品に比べ、昇降ストロークが10mmアップ、昇降スピードは約2倍速くなりました。
診療位置への昇降がスムーズに行えます。

患者さんのかかとが当たっても壊れにくい アルミ成形ベース

耐久性のあるアルミ製のベースを採用。
さらに、床面との段差を抑えた形状で、
患者さんの足元周りをやさしくサポートします。



繰り返し充電に強い※ カセット式リチウム イオンバッテリー

着脱が簡単なカセット式のため、バッテリー交換が容易に。
バッテリー残量は光と音でお知らせします。
※ 鉛蓄電池比(当社従来製品)



スマートに患者さんをサポートする アシスタント用昇降スイッチ

患者さんの背面から座面の高さが調整可能な昇降スイッチを配置しています。




好みに合わせて選べる 丸座 or 角座

クッション性と清掃性に優れた座面は、丸座と角座の2種類からお選びいただけます。



選べる
座面3タイプ
×
ベース3タイプ

【標準付属品】バッテリーパック・充電器
【OPTION】予備バッテリーパック
DR-070CHBP3

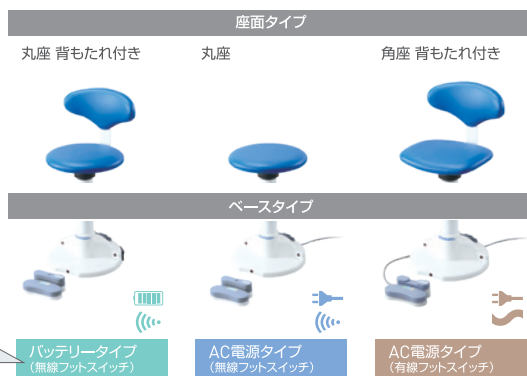

COLOR SELECTION




※ES7以外は受注生産になります。

タイプ	製品コード	製品コード	製品コード
丸座	DR-070CHX	DR-070WLX	DR-070X
丸座背モタレ付き	DR-070CHX-B	DR-070WLX-B	DR-070X-B
角座背モタレ付き	DR-070CHXKB	DR-070WLXKB	DR-070XKB
丸座+クリック仕様	DR-070CHXC	DR-070WLXC	DR-070XC
丸座背モタレ付き+クリック仕様※	DR-070CHX-B-C	DR-070WLX-B-C	DR-070X-B-C
角座背モタレ付き+クリック仕様※	DR-070CHXKBC	DR-070WLXKBC	DR-070XKBC

※クリック仕様：座面の回転を4ヶ所(90°ごと)で保持できます。(受注生産)

電源	バッテリータイプ	バッテリー駆動
	AC電源タイプ	100V 50/60Hz 1.2A (本体)
シート昇降範囲	バッテリータイプ	420mm~560mm
	AC電源タイプ	415mm~555mm
		※クリック仕様の場合、+10mm
昇降ストローク	140mm	
製品質量	14kg(リチウムタイプは16kg)	
製造販売届出番号	28B1X00012000015	
販売名	ペイシェントスツール DR-070	

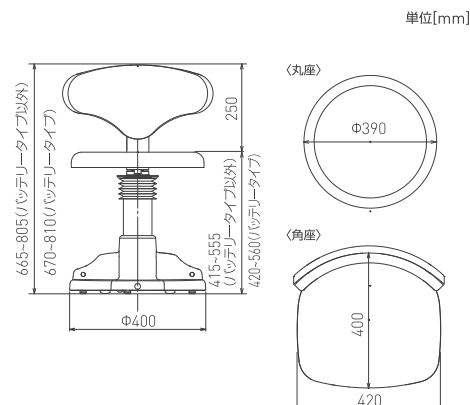

ハイドリックペイシェントスツール

DR-060HY Series

診療空間でのユーザビリティを追求したカタチがそこにある。



ペダル操作で昇降でき 患者さんが座った状態で 座面の高さ調整が可能

ハイドリックポンプ式のペダル操作で座面の高さ調整が行えるため、診療中でも患者さんは座ったままで上昇/下降が可能です。また、フット操作のため、スタッフは立ったままで高さを調整いただけます。



患者さんの身長差や使用シーンに合わせて 調整しやすい昇降 ストローク範囲(135mm)

昇降ストローク(435~570mm)で、患者さんの身長に合わせて高さを調整いただけます。また、検査台などと組み合わせて使用する際にも高さ調整しやすく、無理のない姿勢で検査・診察いただけます。



しっかりと座れる広め& フラットな座面形状

しっかりと腰かけやすい、広め&フラットな座面形状。清掃のしやすさにも配慮しています。背もたれ付(DR-060HYB)も選択可能で、より安定感のある姿勢をサポートします。



フット操作で座面の回転ロックが可能

操作ペダルを上げることで、必要時に座面の回転をロックすることが可能です。操作ペダルは、乗り降りの際に脚と干渉しにくいよう、座面内に収まる設計としています。



すっきり&安定感のあるベース周り

患者さんがつまずきにくいよう、薄くすっきりとしたベース形状で、足元を気にせずに着座いただけます。



COLOR SELECTION



標準色 ES7
オーシャンブルー



ES5
ミントブルー



ES19
ベビーピンク






ES2
イエロー



ES10
ライトブラウン

品 番	DR-060HY	DR-060HYB
本 体 昇 降 機 構	ハイドリックポンプ式(足踏み操作)	
シート昇降範囲	435~570mm	
製 品 質 量	12kg	14kg
製造販売届出番号	27B1X00042000093	
販 売 名	ペイシェントスツールDR-060HY	

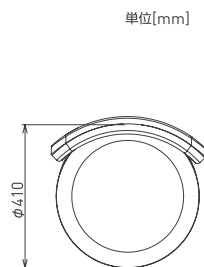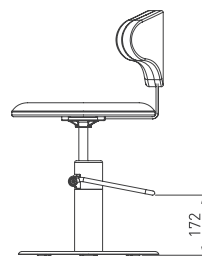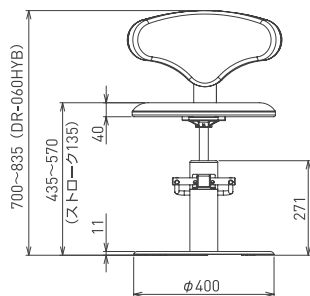

単位[mm]

DR-OT-S450N/S600N・DR-OT-L600N

動きがスムーズで耐久性に優れた光学台

- 低圧電動油圧機構を採用しているため、作動がスムーズで静かなうえ、安定性と耐久性に優れています。
- 移動や運搬などの取り扱いを考慮し、油圧機構部は密閉式としました。
- 操作スイッチは大型のレバー式を採用しました。


製品コード	DR-OT-S450N	DR-OT-S600N	DR-OT-L600N
本体寸法	W450×D450×H594mm	W600×D450×H594mm	
本体昇降範囲	594～827mm 電動油圧式		
電気定格	AC100V 50/60Hz 2.9/3.45A		
操作スイッチ	レバー式		
サービスコンセント	2個(合計1200W)(スイッチBOX側面に1個ずつ、テーブル動作中は850W)		
製品質量	25kg	26kg	
最小荷重	12kg		
最大荷重	80kg		35kg
主な構成	電源コード1本		




DR-OT-S450N/S600N




DR-OT-L600N

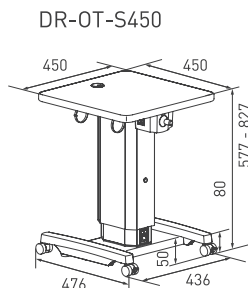

DR-OT-S450

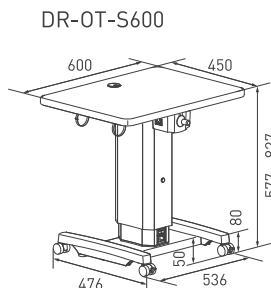

DR-OT-S600

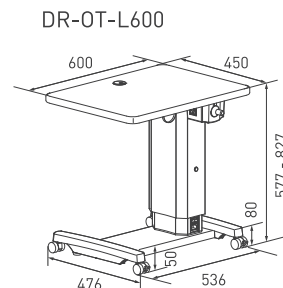

DR-OT-L600

タカラベルモント 保守点検サービスのご案内

- 医療機関での管理には、“**医療機器の保守管理**”が含まれることをご存じですか？
- 患者さんや使用者の**安全をどのように確保**されていますか？
- 医療機器は**正しく安全に使用**されていますか？



医療機器の保守点検は
医療法に定められています。

医療機器の保守点検は、医療機関の業務であり、自ら適切に実施しなければならないと定められています。

医療機器安全管理責任者は、薬事法第2条第4項に規定する病院等が管理する医療機器の全てに係る安全管理のための体制を確保しなければなりません。

平成17年12月22日発出 厚生労働省医政局長通知(医政発第1222001号)

平成19年3月30日発出 厚生労働省医政局指導課長通知(医政指発第0330001号)



医療機器の保守点検は
業務委託することが可能です。

医療機関が自ら行う保守点検(特に定期点検)は外部の業者に業務委託する事も可能です。

又、医療機器は経年変化や、繰り返しの使用により性能や機能が徐々に劣化するものです。機能・性能の維持及び故障等の未然防止には、医療法の定める保守点検にとどまらず、各機器の専門知識を有する修理業者に医療機器の特性に応じて定期的に解体(カバーを外した状態)を伴う点検や、劣化部品の交換を委託する事は大変有効な手立てです。

タカラベルモントの医療機器を安心してご使用いただくために
ベルモントコミュニケーションズ株式会社の専門スタッフに
よる保守点検サービスをご提案させていただきます。

詳細はこちらを
ご覧ください▶



タカラベルモントの医療空間づくり


設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

医療空間の
設計・施工

精度の高い
医院づくり

医療機器の
開発・提供

タカラベルモントはグループの専門ノウハウを活かし、
表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

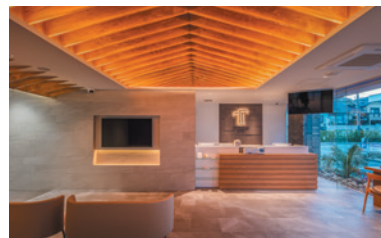

タカラベルモント メディカル営業部公式

Instagram

施工事例やお役立ち情報を発信中 @takara_designworks_medical



タカラベルモント株式会社

〔大阪本社〕 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

●メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除される場合がございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年10月現在のものです。

お問合せは