

ペイシェントスツール

DR-070X series

やさしさをカタチに。

Features

スムーズに座面の高さを調整する

昇降ストローク・スピードUP

当社従来製品に比べ、昇降ストロークが10mmアップ、昇降スピードは約2倍速くなりました。診療位置への昇降がスムーズに行えます。

患者さんのかかとが当たっても壊れにくい

アルミ成形ベース

耐久性のあるアルミ製のベースを採用。さらに、床面との段差を抑えた形状で、患者さんの足元周りをやさしくサポートします。



好みに合わせて選べる

丸座 or 角座

クッション性と清掃性に優れた座面は、丸座と角座の2種類からお選びいただけます。



繰り返し充電に強い*

カセット式リチウムイオンバッテリー

着脱が簡単なカセット式のため、バッテリー交換が容易に。バッテリー残量は光と音でお知らせします。

* 鉛蓄電池比(当社従来製品)



スマートに患者さんをサポートする

アシスタント用昇降スイッチ

患者さんの背面から座面の高さが調整可能な昇降スイッチを配置しています。





【標準付属品】バッテリーパック・充電器
【OPTION】予備バッテリーパック
DR-070CHBP3

丸座 背もたれ付き



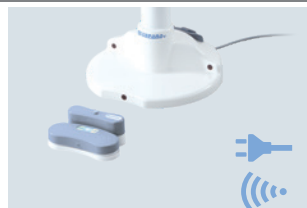
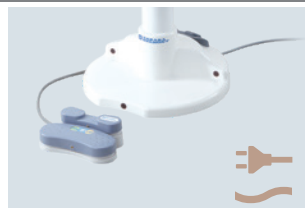
丸座



角座 背もたれ付き



ベースタイプ

バッテリータイプ
(無線フットスイッチ)AC電源タイプ
(無線フットスイッチ)AC電源タイプ
(有線フットスイッチ)

タイプ
丸座
丸座背もたれ付き
角座背もたれ付き
丸座+クリック仕様*
丸座背もたれ付き+クリック仕様*
角座背もたれ付き+クリック仕様*

品番
DR-070CHX
DR-070CHX-B
DR-070CHXKB
DR-070CHXC
DR-070CHX-BC
DR-070CHXKBC

品番
DR-070WLX
DR-070WLX-B
DR-070WLXKB
DR-070WLXC
DR-070WLX-BC
DR-070WLXKBC

品番
DR-070X
DR-070X-B
DR-070XKB
DR-070XC
DR-070X-BC
DR-070XKBC

※クリック仕様：座面の回転を4ヶ所(90°ごと)で保持できます。(受注生産)

Color Selection

*ES7以外は受注生産になります。



ES7(標準色)



ES2



ES5



ES10



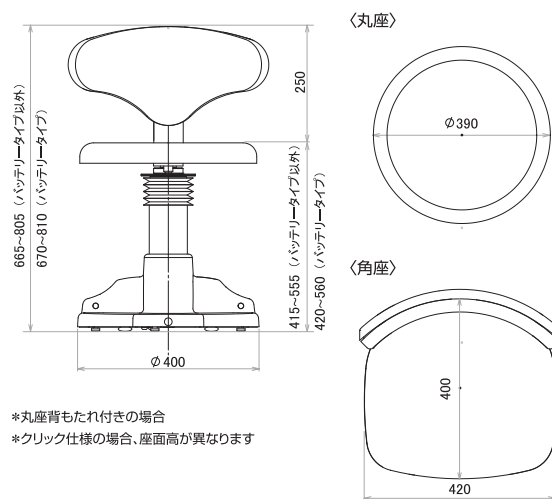
ES19

Specifications

電源	バッテリータイプ	バッテリー駆動
	AC電源タイプ	100V 50/60Hz 1.2A (本体)
シート昇降範囲	バッテリータイプ	420mm~560mm
	AC電源タイプ	415mm~555mm
	※クリック仕様の場合、+10mm	
昇降ストローク	140mm	
製品質量	14kg(バッテリータイプは16kg)	
一般的名称	眼科診療・処置用椅子	
特定保守	非該当	
製造販売届出番号	28B1X00012000015	
販売名	ペイシェントスツール DR-070	

Dimensions

(mm)



*丸座背もたれ付きの場合
*クリック仕様の場合、座面高が異なります

タカラベルモント株式会社

〔大阪本社〕 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

●メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年12月現在のものです。

お問合せは