

| 分娩台 |

DG-JN900



DELIVERY TABLE

シンプルスタイルの汎用型分娩台に、 介助しやすさとやさしさをプラス

ベーシックな操作感はそのままに、医療スタッフの介助性向上と、
産婦さんへのやさしさを実現しました。

陣痛期 / 回復期

産婦さんの
乗り降りに配慮した
最低位580mm



分娩期

介助しやすい高さに
調節できる
最高位1,000mm

さまざまな“姿勢”に対応できるフレキシブル支脚器

操作性の高い支脚器で
簡単セッティング



産婦さんの体型に合わせて支脚位置と開脚幅の調節を
2ステップで簡単に行うことができ、いきみやすい位置に
調節可能です。

踵受けから股受けへの
移行もスムーズ




踵受け

股受け


介助しやすさを追求

メモリー機能付き 電動スライド式補助台

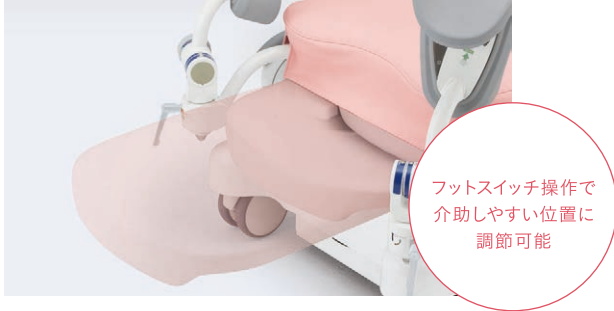

ワンタッチで最大幅・最小幅へ移行できるオート動作に加え、よく使うスライド幅のメモリー機能も搭載しています。

骨盤誘導線を調整できる 腰板昇降

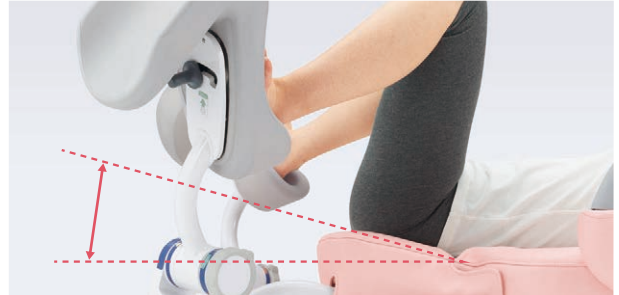

フットスイッチ操作にて腰板を上下昇降させることができ、分娩状況に合わせた腰板の調整が可能です。

ワイヤレスフットスイッチで 足もとスッキリ



赤外線が360°送信され、操作時の配置や向きが自由度がアップ。




よく使う姿勢にオート動作で
移行可能なプリセット機能*



ワンタッチで移行でき、
ボタンを押し続ける必要がありません。

*本体プリセットは本体高さ・バックレスト角度、補助台プリセットはスライド幅をメモリーできます。

本体からの操作も可能な サブスイッチ

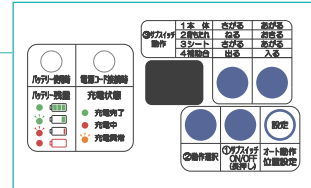

バッテリー搭載

AC電源なしでも約1時間、本体動作が可能です
(満充電時)。バッテリー残量はLEDランプで確認
できます。

搬送を考慮した設計

大型4輪キャスター搭載



産婦さんを分娩台に乗せたまま搬送が可能です。キャスターは、一度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切替ができます。

回転式サイドフェンス



回転式のため省スペースで収納でき、ストレッチャーの横付けも可能です。

OPTIONS



○ハンドスイッチ
DG-JN900-HSWN



○分娩台マット
DG-JN900-GM



○搬送用ハンドル
DG-JN900-TH



○サイドレール/イルリガートル架
DG-JN900-SR/DR-OPTM-ZNN



○酸素ボンベホルダー
DG-JN900-BH



○防水パイルカバー
DG-OPT-JN900PB/PL/PM



○枕

○分娩台ディスプレイカバー
(50枚/箱) (10枚/箱)
DG-OPT-DDC DG-OPT-DDCS

○分娩台脚板ディスプレイカバー125/150
(70組/箱) (10組/箱)
DG-OPT-FDC125 DG-OPT-FDC125S
DG-OPT-FDC150 DG-OPT-FDC150S

サイズは
125cm・150cmの2種類

COLOR SELECTION



ES19
ベビーピンク(標準色)



ES17
フロスグリーン



ES9
アイボリー



ES2
イエロー

抗菌・耐アルコール仕様の 合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801:2012「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。




耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

SPECIFICATIONS

寸法図 [mm]

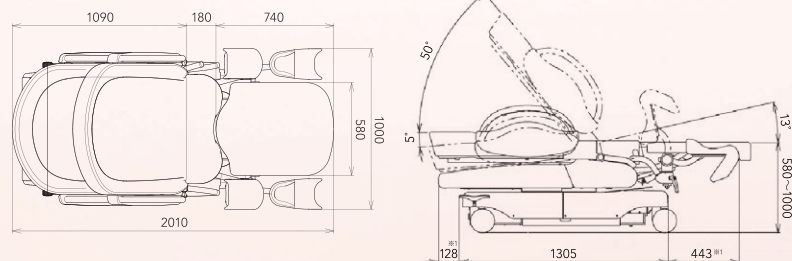

※1 本体高さが初高の時の寸法です。本体高さによって異なります。

[仕様]

製品コード	DG-JN900
電気定格	AC100V 50/60Hz 520VA
質量	355kg
主な構成品	フットスイッチ1個、電源コード1本、シートカバー1枚、ステンレスパット1個、怒責グリップ1組
一般的名称	分娩台
特定保守	非該当
製造販売届出番号	27B1X00042000077
販売名	分娩台 DG-JN900

作動(運転モード)・・・非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1:5
*デューティサイクル:油圧モーターの連続作動時間に対する休止時間の比率
(ただし、環境温度により異なります。)



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、
もちろん健康になってほしい、
そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルモント、メディカル営業部の使命です。

ウィメンズヘルスケア事業
の詳細はこちらから
<https://whc-takara.jp>



妊娠から産後1年までの わたしの体験記

先輩ママのリアルな声から
作成しました



タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

<https://me.takarabelmont.co.jp>

営業所

札幌 (011)863-2139

新潟 (025)333-8405

広島/高松 (082)277-6700

仙台/盛岡 (022)231-3458

名古屋 (052)931-5163

福岡 (092)474-7306

さいたま (048)640-5803

金沢 (076)221-8412

鹿児島 (099)226-9481

東京 (03)3401-9795

大阪 (06)6211-5947

横浜/静岡 (045)523-7010

岡山 (086)233-8826



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。 ●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることございます。 ●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。 ●このカタログは2026年6月現在のものです。

30F260600690P
YY-ME241