

The background features a warm, golden-brown gradient. Overlaid on this are several semi-transparent squares of varying shades of beige and tan, arranged in a staggered, overlapping pattern. The word "Exfeel" is written in a white, serif font in the upper left quadrant.

Exfeel

Exfeel

〈イクスフィール〉とは
examination(診察) + feel(心地のいい)

患者さんにとって、ドクターにとって居心地のいい診療空間を提案したい。
そんなタカラベルモントの願いが込められています。

feel quality

より快適な検査室をご提案。
〈イクスフィール〉はさまざまな医療分野で
診療空間の常識を変えていきます。



※写真はRL-EFRH SH8 (回転タイプ:標準枕)です。

上質な診療空間に応える一台

皮膚科

形成外科

美容外科

産婦人科

空間づくりにこだわった診療室にも対応するスタイリッシュなデザイン。バックレスト、レッグレストのメモリー機能で、顔から足先までの処置が一台で可能になります。また、椅子型のため乗り降りがスムーズにできます。

スムーズな診療を進めるために、説明のしやすさ、使い勝手の良さを重視



フラットポジションへの移行

頭部から足先まで無理なく支える設計により、患者さんの負担を抑えた安定した姿勢を実現します。



リクライニング機能で、さまざまな処置や診断がスムーズに。スムーズに、効率よく、さまざまな処置や超音波診断のポジションが得られるリクライニング機能。



快適な高さにも調節可能。
座り心地にもこだわりました。

ドクターにとって最適な高さの調節も簡単。さらに座り心地のいいシートクッションとソフトな手触りのウレタン素材で、患者さんの負担をやわらげます。



スムーズな診療をアシストする アームレスト。

両サイドのアームレストは取り外し可能。サイドポジションからの患者さんへのアプローチもできます。また、車椅子の患者さんや体の不自由な患者さんの導入をやさしくサポートします。



かかとをキープする ロールアップレッグレスト。

バックレストと連動して伸縮するロールアップレッグレストを採用。かかとが安定するため安心感があり、患者さんの疲れも軽減します。

フットスイッチ


ワンタッチで診療位置・乗降位置へ
スムーズに移行



プリセット・オートリターン機能に加え、
マニュアル操作で細かな調整も行えます。


フレキシブルな使いやすさにこだわった、3つのヘッドレスト

標準枕

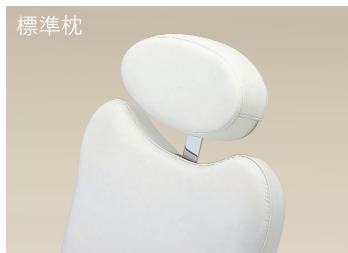

厚みを持たせた クッション性のあるヘッドレスト

丸みを帯びたデザインが特徴です。スライド式で高さの調節もスムーズ。また必要に応じて多機能枕や処置用枕に取り替えることもできます。

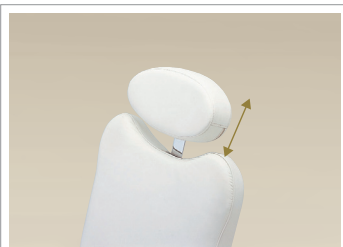


高さの調節が可能です。

多機能枕



診察時にも処置時にも対応する 多機能なヘッドレスト

可動域の広い2関節の採用で、診察や説明時には起こして、検査や処置時には倒してと幅広く利用できます。

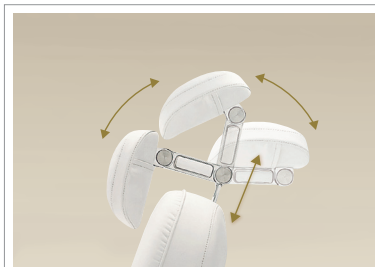

処置用枕



頭部や顔の処置に適した コンパクトサイズ

2関節の採用により頭部を安定させたまま頭の角度を変えることができ、患者さんの負担を軽減します。

必要に応じて角度と高さを変えられる 可動域の広い2関節枕

多機能枕と処置用枕には、フレキシブルに角度を変えられる2関節枕を採用。診察時は立てて、検査時や処置時には倒してと、ドクターにとって使いやすい角度に調節することができます。

患者さんの身長に合わせた高さ調節も可能です。

用途に合わせて選べる、2つのベースタイプ




固定タイプ



回転タイプ

220°

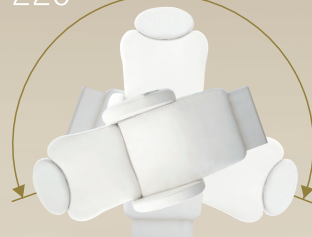

空間を有効活用できる 回転タイプ。

患者さんと向き合う位置を変えられる回転タイプもご用意。診療内容に適した状態をキープし、ドクターにとっても使い勝手のいい空間を実現します。

タイプ

製品コード

固定タイプ(標準枕)

RL-EF-H

固定タイプ(多機能枕)

RL-EF-HF

固定タイプ(処置用枕)

RL-EF-HT

タイプ

製品コード

回転タイプ(標準枕)

RL-EFRH

回転タイプ(多機能枕)

RL-EFRHF

回転タイプ(処置用枕)

RL-EFRHT

※回転タイプはステップなしも選べいただけます。

color selection



SH8 (標準色)



SH21



SH9

ソフトな手触りのウレタン素材を採用

オプション

ヘッドレスト

- ・標準枕 RL-H
- ・多機能枕 RL-HF
- ・処置用枕 RL-HT

モニターデリバー

RL-OPT-MD

ハンドスイッチ

※バックレストとレッグレストが操作可能

イクスフィール用防水カバー

(枕、バックレスト～レッグレスト、手すり上・下のセット)

○RL-EF-OPT-CW (ホワイト)

※写真の製品カラーはSH9です。

Exfeel

Luxury Design

上質な構えが生み出す
心地よい時間を

【固定タイプ】

- SH24
 - SH15
- スタンダードな
固定タイプ。




【回転タイプ】

- SH24
 - SH15
- 診療空間を
有効活用できる
回転タイプ。




Options

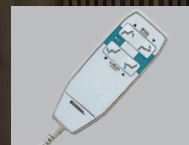

ハンドスイッチ

バックレストとレッグレスト
のリクライニング位置を個別
に調節することができます。

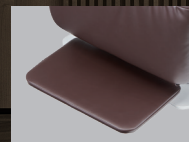

ステップ

本体回転時に足元をサポート
します。
※回転タイプにのみ取付可能
です。

Specifications

Exfeel

固定タイプ



製品コード	RL-EF-※※	※※枕タイプにより異なります。
本体昇降範囲	470mm~735mm	
バックレスト昇降角度	-3°~85°	
電気定格	100V 50/60Hz 3.9/4.5A	
製品質量	135kg	

回転タイプ

製品コード	RL-EFR※※	※※枕タイプにより異なります。
本体昇降範囲	520mm~785mm	
バックレスト昇降角度	-3°~85°	
電気定格	100V 50/60Hz 3.9/4.5A	
製品質量	164kg	

Dimensions


(単位:mm)

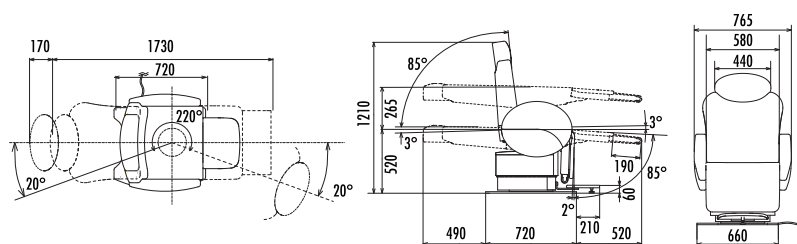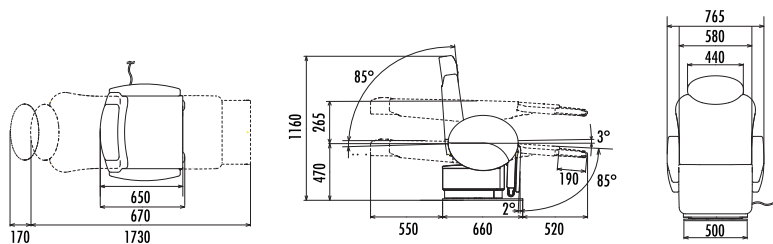

Exfeel Luxury


固定タイプ

製品コード	RL-EFLX	
本体昇降範囲	470mm~735mm	
バックレスト昇降角度	-3°~85°	
電気定格	100V 50/60Hz 3.9/4.5A	
製品質量	138kg	

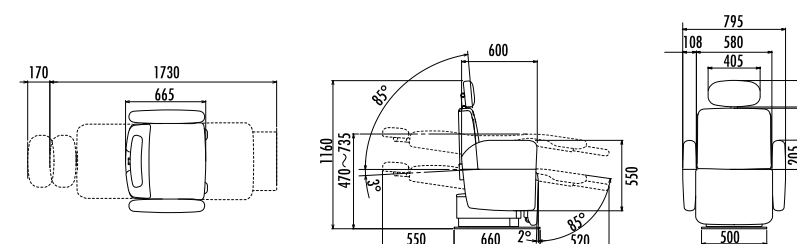

回転タイプ

製品コード	RL-EFLXR	
本体昇降範囲	520mm~785mm	
バックレスト昇降角度	-3°~85°	
電気定格	100V 50/60Hz 3.9/4.5A	
製品質量	170kg	

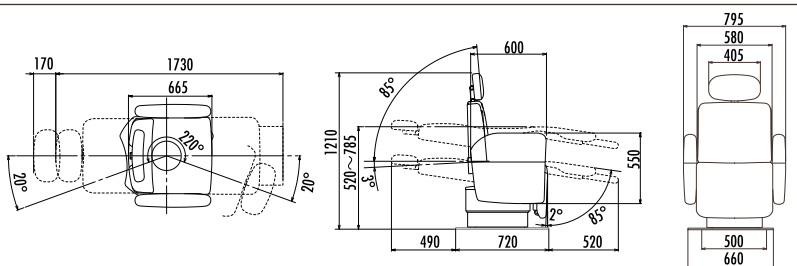

一般的名称	診療・処置用椅子	特 定 保 守	非該当	製造販売届出番号	27B1X00042001023	販 売 名	イクスフィール
-------	----------	---------	-----	----------	------------------	-------	---------

タカラベルモント株式会社

大阪本社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル営業部

札幌	(011)863-2139	新潟	(025)333-8405	広島/高松	(082)277-6700
仙台/盛岡	(022)231-3458	名古屋	(052)931-5163	福岡	(092)474-7306
さいたま	(048)640-5803	金沢	(076)221-8412	鹿児島	(099)226-9481
東京	(03)3401-9795	大阪	(06)6211-5947		
横浜/静岡	(045)523-7010	岡山	(086)233-8826		

●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	(03)3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	(06)6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	(098)897-6655

50K2607025.YA YY-ME510



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年7月現在のものです。

●お問い合わせ

ホームページアドレス <https://me.takarabelmont.co.jp>

