


DG-385

緊急分娩、緊急処置への対応を
可能にした機能型分娩台。



フットスイッチで
基本操作が可能。

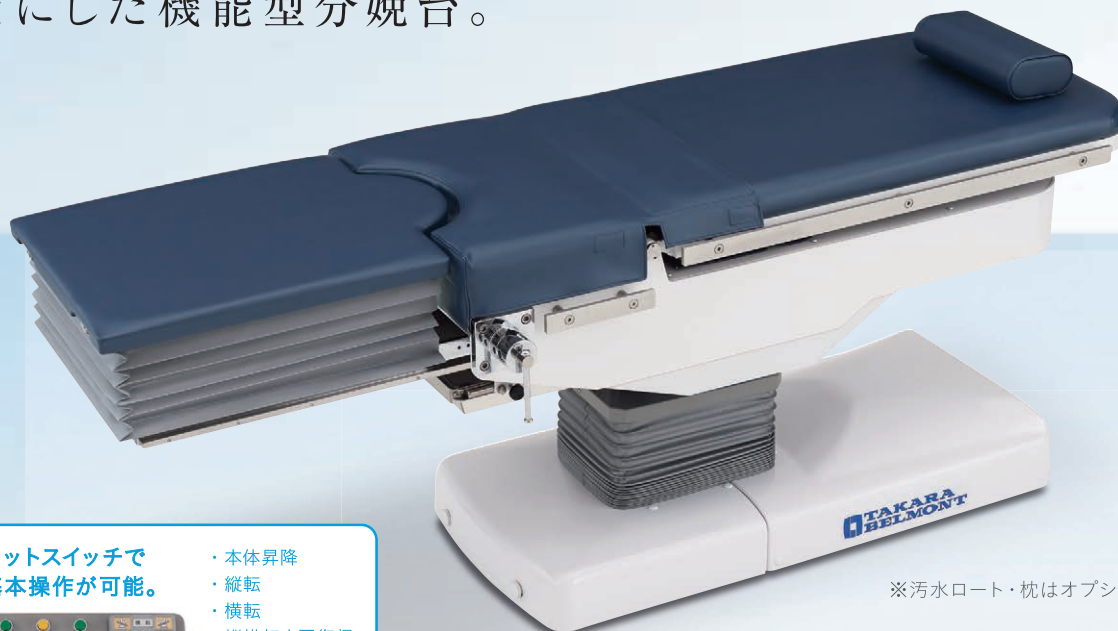

- ・本体昇降
- ・縦転
- ・横転
- ・縦横転水平復帰
- ・バックレスト昇降
- ・補助台スライド
- ・腰部単独昇降



※汚水ロート・枕はオプションです。

FEATURE

縦横転機構・電動スライド式補助台が、緊急時の対応をきめ細かくサポートします。


■ 縦横転機構

麻酔処置、血圧低下への対応など、
緊急時のポジション確保が可能。
縦横転の水平復帰はオート操作で
行えます。

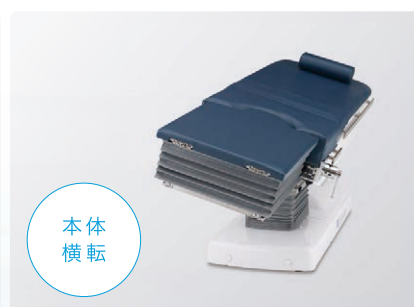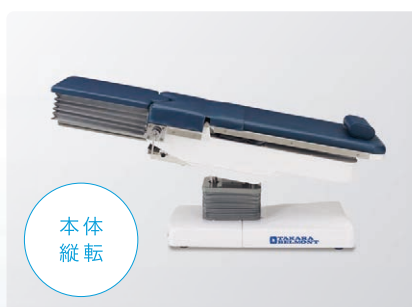

■ 電動スライド式補助台

補助台のスライドは電動で調節が
可能。分娩の進行状況や処置に合わ
せた対応ができます。

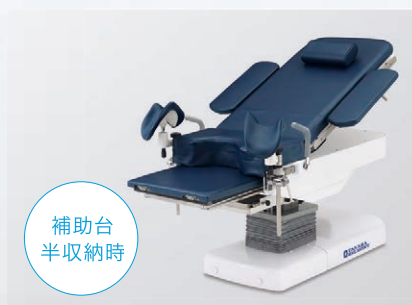

■ 着脱式クッション

補助台・腰部のクッションが取り外せるので、清掃が容易に行なえます。


取り外し後▷



取り外し前▷

■ キャスター＋本体ロック

キャスター＋本体ロックで移動・固定が容易に。分娩前後のセッティング、清掃時などの移動がスムーズです。

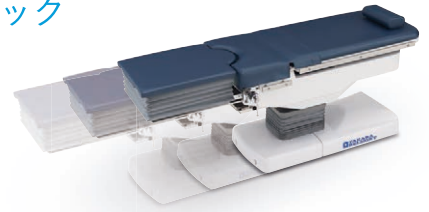

■ 抗菌・耐アルコール

菌の増殖を抑制し、アルコールの耐性を持つ合成皮革の採用でお手入れがしやすくなります。



抗菌性

JIS Z 2801:2012「抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

OPTIONS




股受け(左右1組)
DG-396N-C



踵受け(左右1組)
DG-396-BN



上肢台※
DG-385-AN

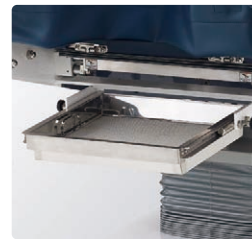

汚水ロート
DG-385-XR






枕
EX-CS-MS ES23

※一般的名称:手術台アクセサリ 特定保守:非該当 製造販売届出番号:28BIX00012000019 販売名:上肢台M

SPECIFICATIONS

寸法図 [単位:mm]

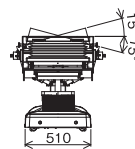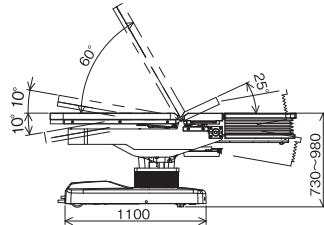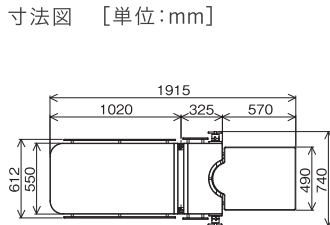

仕様

製品コード	DG-385V
電気定格	100V 50/60Hz 5A
質量	290kg
主な構成	フットスイッチ1個、電源コード1本、シートカバー1枚、怒責桿1組
一般的名称	分娩台
特定保守	非該当
製造販売届出番号	28BIX00012000072
販売名	分娩台 DG-385

<製品販売業者>

タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、もちろん健康になってほしい、そしてなによりその尊厳が守られてほしい。その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、わたしたちタカラベルmont、メディカル営業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア事業
の詳細はこちらから
<https://whc-takara.jp>



妊娠から産後1年までの
わたしの体験記

先輩ママのリアルな声から
作成しました



タカラベルmont株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

<https://me.takarabelmont.co.jp>

営業所

札幌 (011)863-2139
新潟 (025)333-8405
広島/高松 (082)277-6700

仙台/盛岡 (022)231-3458
名古屋 (052)931-5163
福岡 (092)474-7306

さいたま (048)640-5803
金沢 (076)221-8412
鹿児島 (099)226-9481

東京 (03)3401-9795
大阪 (06)6211-5947

横浜/静岡 (045)523-7010
岡山 (086)233-8826

