

OPERATING TABLE

外科用手術台

DR-2000



DR-2000

コストパフォーマンスを実現した
シンプルな手術台



電動油圧駆動で、必要なポジションへスムーズに移行。

- 縦転は各20°、背板屈折は上方向70°・下方向15°の機能を備えています。
- 縦転機能に水平一時停止機能を採用。ポジション変換、水平確認が容易に行えます。



見やすいピクトグラフ表示のハンドスイッチで明瞭操作

- ハンドスイッチには誤操作を防ぐためのEスイッチを搭載。Eスイッチを押した状態で各作動スイッチを押すことで本体が作動します。

一般外科をはじめ

医院処置室、救急処置室、泌尿器科、

婦人科、美容・形成外科などに対応。

- 各駆動部に電動油圧機構を採用。
作動はスムーズで静かなうえ、安定性と耐久性を備えています。
- 本体テーブルトップの昇降範囲は最低位600mm～最高位900mm。
各科手術で幅広くご使用いただけます。
- 移動を考慮し、大型キャスターを内蔵しています。



各種アクセサリーとの組みあわせで、各科手術に対応可能。

- 脚板は容易に取りはずすことができ、別売の枠付汚水ロート・支脚器・汚水タンクを組みあわせることで、碎石位での処置等への対応も可能です。
- 各種アクセサリーをご用意していますので、各科手術に対応可能です。



(支脚器・枠付汚水ロート・汚水タンクは別売です。)


Dimensions

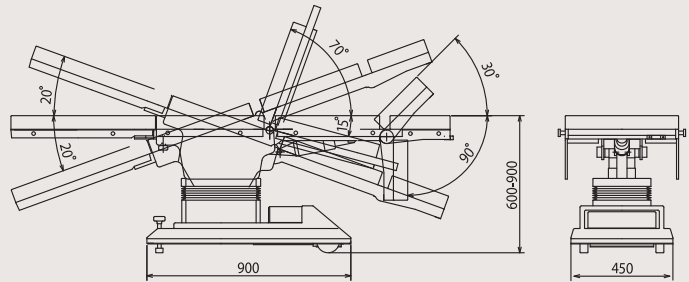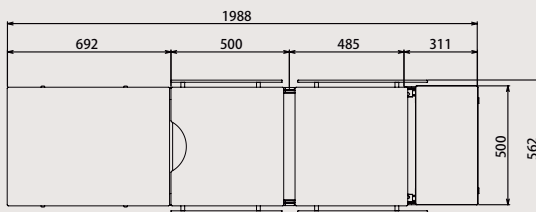

Specifications


製品コード	DR-2000N
テーブルトップ寸法	500×1988mm
本体昇降範囲(電動油圧式)	600～900mm
本体縦転角度(電動油圧式)	頭上方20° 頭下方20°
背板屈折角度(電動油圧式)	上方70° 下方15°
枕板屈折角度(手動)	上方30° 下方90°
電気定格	AC100V 50/60Hz 5A
製品質量	180kg
主な構成	ハンドスイッチ1個、電源コード1本
一般的名称	汎用電動式手術台
特定保守	該当
製造販売届出番号	28B1X00012000001
販売名	外科用手術台 DR-2000

上肢台

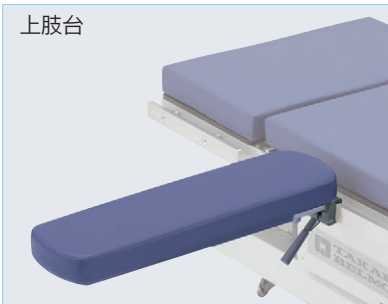


製品コード：DR-OPTM-AT
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000019
 販売名：上肢台M

スクリーン架

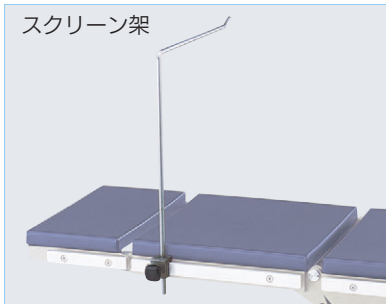

製品コード：DR-OPTM-BL05
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000021
 販売名：スクリーン架L型M

透視用上肢台小型

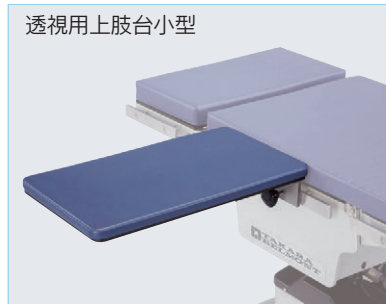


製品コード：DR-OPTM-SIAK/SIBK
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000047
 販売名：透視用上肢台小型M

支脚器



製品コード：DR-OPTM-CN05
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000026
 販売名：支脚器M

肩受け

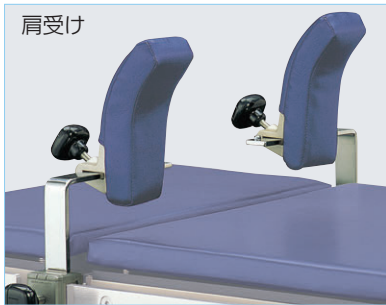

製品コード：DR-OPTM-DN05
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000027
 販売名：肩受けM

側臥位用上肢台




製品コード：DR-OPTM-G05
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000032
 販売名：側臥位用上肢台M

自在胴受け



製品コード：DR-OPTM-EN05
 一般的名称：手術台アクセサリ
 特定保守：非該当
 製造販売届出番号：28B1X00012000029
 販売名：自在胴受けM

枠付汚水ロート

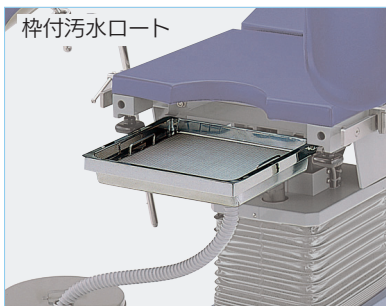

製品コード：DR-OPTM-X20

汚水タンク



容量10ℓ

[製造販売業者]タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

タカラベルモント株式会社

●大阪本社
 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL. (06) 6212-3620

●メディカル営業部

札幌	TEL. (011) 863-2139	金沢	TEL. (076) 221-8412
仙台/盛岡	TEL. (022) 231-3458	大阪	TEL. (06) 6211-5947
さいたま	TEL. (048) 640-5803	岡山	TEL. (086) 233-8826
東京	TEL. (03) 3401-9795	広島/高松	TEL. (082) 277-6700
横浜/静岡	TEL. (045) 523-7010	福岡	TEL. (092) 474-7306
新潟	TEL. (025) 333-8405	鹿児島	TEL. (099) 226-9481
名古屋	TEL. (052) 931-5163		

●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	TEL. (03) 3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL. (06) 6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL. (098) 897-6655

●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。
 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
 ●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
 ●納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
 ●このカタログは2026年8月現在のものです。

●お問い合わせは…



<https://me.takaramelmont.co.jp>



30J26080048.UP
 YY-ME319