



リカバリーチェア

LIMONIS
リモニス



Sit

Fit

for PATIENT



乗り降りしやすい 足元スペース

低初高かつ足元がすっきりとしたデザインで、スムーズな乗り降りをサポートします。



枕の高さ調節が可能


枕を上下にスライドさせることで、患者さんの体格に合わせて枕位置を調節できます。片手でも操作しやすいため、座りながらでも調節いただけます。

LIMONIS

リモニス

治療と向き合う時間を少しでも
前向きに明るく過ごせるように。
その想いのもと、レモンの花言葉である
「誠実な愛」をもって生まれたのが
LIMONIS-リモニス-です。

患者さんはもちろん、
スタッフさんにとっても
やさしい空間を創造します。

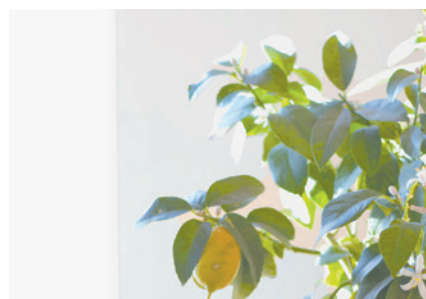

Relax

幅広レッグレストで ゆったりスペースを提供


レッグレストの幅を座面より広く
することで、居住性をさらに高めました。

伸長レッグレストで 足元までカバー

リクライニング操作に追従してレッグ
レストが伸長し、ベッド状態でも足元
までカバーします。



リクライニング操作は ハndsスイッチで

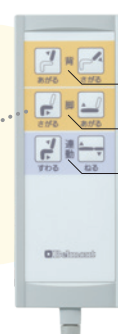

●バックレスト あがる／さがる

●レッグレスト あがる／さがる

●バックレスト&レッグレスト連動
すわる／ねる

文字やイラストの
見やすさに
こだわりました



for STAFF


片手で操作できる手すり機構

スタッフさんに聞きました!



穿刺前に患者さんの
腕の高さを調節している

※当社調べ(n=40)

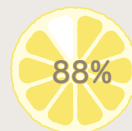

One Action



しっかりと腕を置ける

穿刺する時は...

手すりを上げることで、患者さんの腕がより伸ばしやすいよう配慮しました。
また、手すりは上げるとロックが掛かり固定されます。



手すりを下げる時は...

ロック解除ボタンは
手すり裏側にあります。



横乗りする時は...

手すりを跳ね上げることで、
スムーズに乗り降りいただけます。





緊急時には患者さんの移載がよりスムーズに

for STAFF



ストレッチャーに合わせて高さ調節が可能

本体昇降機構搭載で、緊急時のスムーズな移載をサポートします。本体昇降スイッチは両サイドからアプローチしやすい位置にあり、フット操作のため両手が塞がっていても操作可能です。



本体昇降スイッチ

患者さんも使用するハンドスイッチには搭載しないことで、通常使用時の誤操作を防止します。



Head
Down

ヘッドダウン

バックレストをリクライニングさせることで、水平よりも低い位置まで頭を下げるができます。



4輪まとめてロック/解除が可能なキャスター

(キャスタータイプ[RL-LMC])

操作ペダルの踏み込み/跳ね上げだけでロック/解除が行えます。操作ペダルはチェアサイドからもアプローチ可能です。

※標準タイプ(RL-LM)をご購入の場合、キャスターユニット(RL-LM-CU)の取付が可能です。

少しの移動
に便利!



使い勝手や居住性をさらに高めるオプションも充実。



モニターデリバリー
〔RL-LM-MD〕

患者さんの見やすい位置に角度を調節できます。
※モニターおよびモニターアームは別売。
(写真はSKNET社製)



テーブルデリバリー
〔RL-LM-T〕

治療中の居住性を高めるテーブル。
小物などを置くのに便利です。



テーブルデリバリー
〔RL-LM-T〕
＋モニターブラケット
〔RL-LM-T-BK〕

※モニターおよびモニターアームは別売。
(写真はSKNET社製)



イルリガートル架
〔RL-LM-D〕

チェア後方の左右のどちらのサイドにも取付可能です。

追加ブラケット
〔RL-LM-D-BK〕

両サイドに取り付ける場合は、追加のブラケットをご利用ください。



リモニス用防水
ストレッチカバー
〔RL-LM-OPT-C〕

枕、バックレスト～レッグレスト、手すりカバーのセットです。



レッグレストカバー
〔RL-LM-LC〕

レッグレストの下部と伸長レッグレストを覆うビニールカバーセット。



キャスターユニット
〔RL-LM-CU〕

4輪まとめてロック/解除が可能なキャスター。緊急対応時の少しの移動やレイアウト変更時の移動に便利です。
※標準タイプ(RL-LM)をご購入の場合、取付が可能です。



標準タイプ
[RL-LM]



キャスタータイプ
[RL-LMC]



Color Selection



ES35 レモネード
(標準色)



ES10 ライトブラウン




ES16 パープルブルー



ES19 ベビーピンク

Specifications

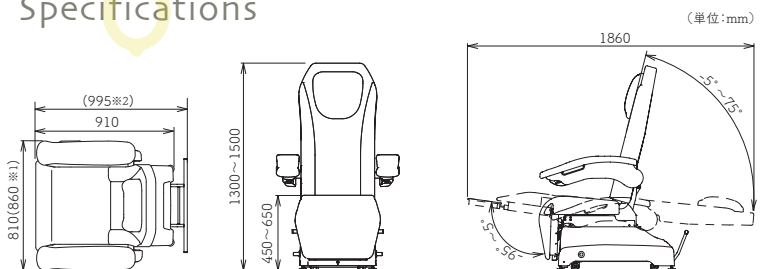

※1 手すり取付位置変更時

※2 キャスタータイプの寸法です。

衛生面にもこだわっています!

抗菌・耐アルコール仕様の
合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801 : 2012「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

手すりの取付位置は2パターンから選べます!



510mm



560mm

※取付位置の変更には工具を用いた作業が必要です。
変更する場合は、当社または指定の業者へ
お問い合わせください。

製品コード	RL-LM(標準タイプ) RL-LMC(キャスタータイプ)
本体外形寸法	W810mm×L910mm×H1300mm(標準タイプ) W810mm×L995mm×H1300mm(キャスタータイプ)

製品質量	105kg(標準タイプ) 120.5kg(キャスタータイプ)
本体昇降ストローク	200mm(電動モーター式)
電気定格	AC100V 230VA 50/60Hz

主な構成部品	ハンドスイッチ1個、枕1個、電源コード1本
一般的名称	診療・処置用椅子
特定保守	非該当
製造販売届出番号	27B1X00042000085
販売名	リモニス



タカラベルモント株式会社

〔大阪本社〕 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

● メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takaravelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除される場合がございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年8月現在のものです。

お問合せは