

ルーパー
Looper
Series
[M type / C type]

Concept

診察、処置、リカバリー、各
オプションとの組み合わせ

Recovery

リクライニングさせてリカバリーチェアに。
イルリガートル架の取り付けも可能です。
背ずれを抑えたシート形状で、
ゆったりとお過ごしいただけます。



各部屋をスムーズ

ルー
Loo

Transport

大型4輪キャスター搭載で移動もスムーズに。
それぞれの部屋へ移送する際の移動性の高
さを追求しました。



部屋への移送もこの一台で。

で多様なシーンで大活躍。

Examination

一般診療はもちろん、股受・汚水トレイ（バット受け）・カーテン架を取り付けると、碎石位への対応も可能。様々なオプションを組み合わせることで、多科目に対応した診察台としてご使用いただけます。

にループ(Loop)

ーパー

per

Treatment

上肢台を取り付けて処置台に。
腕の処置や、内視鏡検査・処置等、様々な処置に対応しています。
シート幅600mmでサイドからのアプローチにも配慮しています。

Series

M type Multi Type

[CR-LPRM]

多体位に対応することで、診療・処置・観察の流れに合わせた姿勢調整をスムーズに行える設計です。体位変更が必要な場面でも、現場の手順に沿って姿勢を整えやすく、診療シーンに応じた使い分けが可能です。



複数の診療シーンを想定した姿勢バリエーションを備えています。状況に応じて適した姿勢を選択でき、様々な科目や場面で幅広く活躍します。



スムーズなリクライニング操作

ガスシリンダーで操作をアシストします。バックレストを起こすと腰部が沈み、患者さんの背ずれを抑える、スリップレス機構を採用しました。



Core Type C type

[CR-LPRC]



仰臥位・座位といった基本姿勢に対応し、現場での使いやすさを追求したモデルです。操作や機能はシンプルに、分かりやすくスムーズな取り回しで作業効率の向上にも貢献します。


乗り降りしやすいチェア形状

レッグレスト部分が折れ曲がるため、側面からの乗り降りがよりスムーズに行え、車いすからの移載等にも対応しやすくなります。



スムーズなリクライニング操作

レッグレストはバックレストと連動して動作し、ガスシリンダーで操作をアシストします。バックレストを起こすと腰部が沈み、患者さんの背ずれを抑える、スリップレス機構を採用しました。

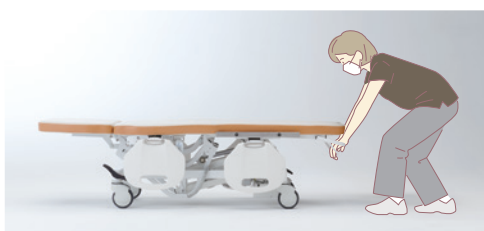


小回りが利きやすい省スペース設計


チェア形状になることで、より小回りが利きやすくなり、省スペース運用をかなえます。



Features

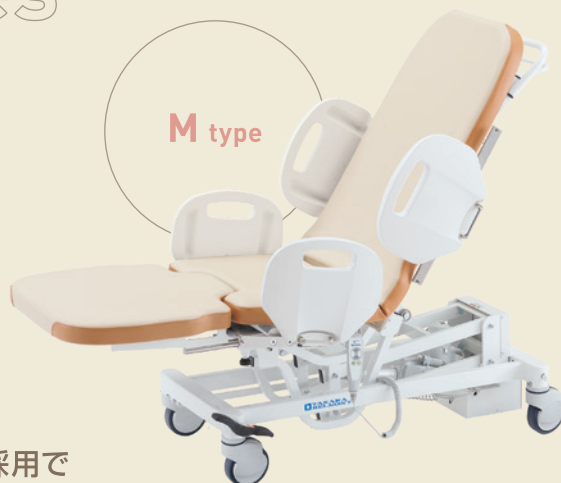

M type

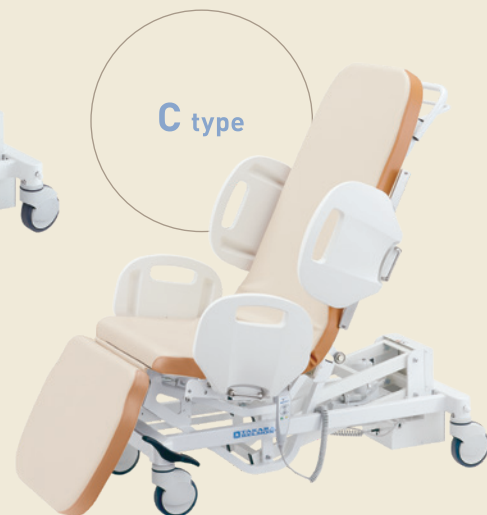

C type

大型4輪キャスター採用で 移送がスムーズ

〔トータルロック付キャスター〕

一度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切替可能です。ロック時には回転と旋回の双方が固定され、安定感のある検査をサポートします。



乗り降り&施術しやすい昇降機能

本体昇降スイッチに加えて2メモリーのプリセットスイッチを採用。高さ調整をアシストします。



プリセット(2ポジション)付き ハンドスイッチ

本体昇降スイッチに加え、2メモリーのプリセットスイッチを採用。バッテリー残量が低下すると、ハンドスイッチの操作時にランプ表示とブザー音でお知らせします。また、シート横にハンドスイッチホルダーも用意し、収納場所にも配慮しました。



カセット式リチウムイオンバッテリー

繰り返し充電に強く、長時間使用が可能な小型リチウムイオンバッテリーを採用。1回の充電で約100回の本体昇降が可能です(新品時)。バッテリー減少時にはLEDランプと警告音の両方でお知らせ。着脱簡単なカセット式バッテリーのため、交換・充電が楽に行えます。


※充電器は別売です。

OPTION



プリセット(2ポジション) 付きフットスイッチ

オプションのフットスイッチでも本体の昇降操作が可能です。

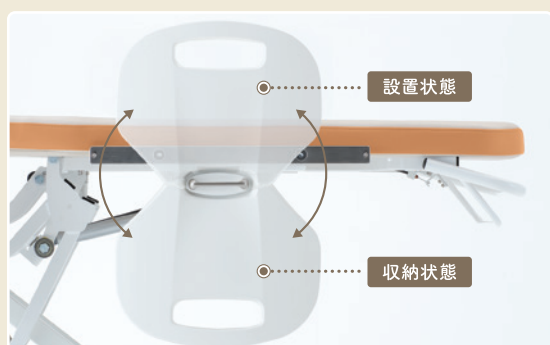

スペースを取らない回転式サイドフェンス (非導電性素材採用)

軽く引いて回すだけの回転式のため、スペースを取らずにフェンス操作することが可能です。



片手で操作できる ワンハンドルロック機構搭載

フェンスは片手で操作可能です。「設置状態」と「収納状態」位置で手を離すとロックがかかります(内側から押ししてもロック解除されません)。



応急処置を考慮した設計

心臓マッサージなど、荷重のかかる処置時にも配慮した強度を確保しました。



耐荷重の向上

耐荷重180kgへ強化。昇降時・搬送時の安定性向上により、幅広い患者さんへの対応が可能になりました。


Option Customize

体位別オプションカスタマイズ例

サイドレール搭載で様々なオプションの取り付けが可能

シートの両側にサイドレールを標準搭載。アームサポートや股受など、使用シーンに合わせてオプションを取り付けることができます。

股受や支脚器等のオプションの取り付けが可能です。

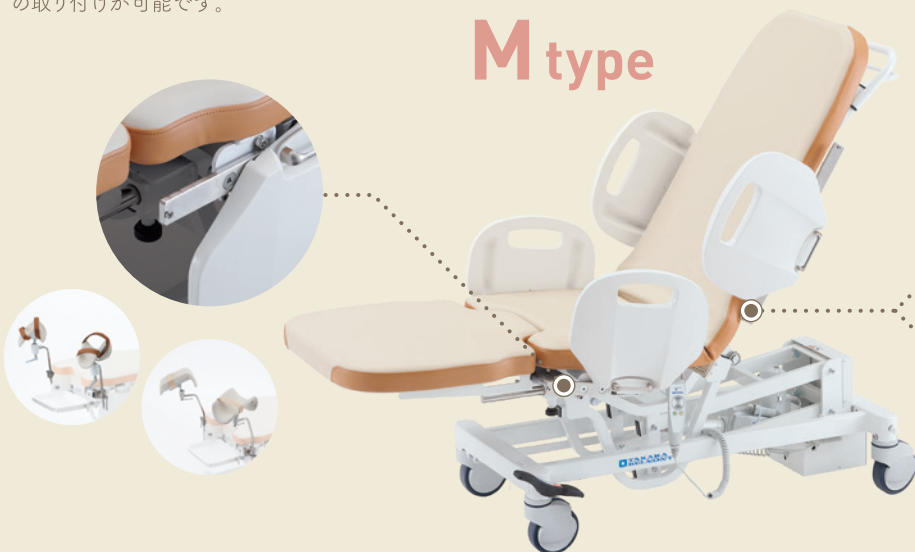

上肢台やイルリガートル架、胸受け等のオプションの取り付けが可能です。

C type

LPRC用サイドレール **OPTION**

Cタイプに下腿受けの取り付けが可能です。



※本ページでは、取り付け可能なオプションの一部をご紹介します。詳細はp9-10をご参照ください。

M type

仰臥位構成例

For 外科・整形外科処置



[使用オプション]

- ・透視用上肢台小型M [DR-OPTM-SIBK]
 - ・スクリーン架 [EX-CS-BLM]
- ※カーテンは含みません。

M type

砕石位構成例

For 婦人科・泌尿器科診察




[使用オプション]

- ・股受 [CR-LPR-CZ]
- ・汚水トレイ [CR-LPR-XT]
- ・カーテン架 [CR-LPR-CB]
- ・フットスイッチ(小物トレイ付) [CR-LPR-FK]
- ・シートカバー [CR-LPR-SC]
- ・枕(大) [CR-LPR-M]

C type

側臥位構成例

For 下部内視鏡検査等

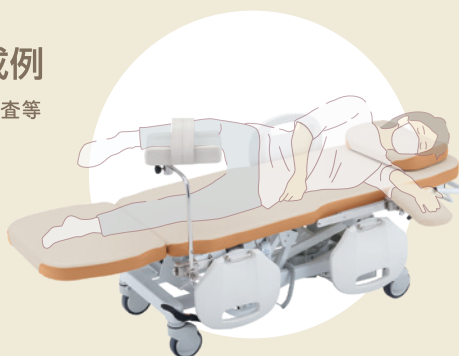


[使用オプション]

- ・アームサポートR [CR-LPR-ASR]
- ・下腿受け [CR-LPR-H]
- ・LPRC用サイドレール [CR-LPRC-SR]
- ・枕(大) [CR-LPR-M]

C type

座位構成例

For 点滴・リカバリー

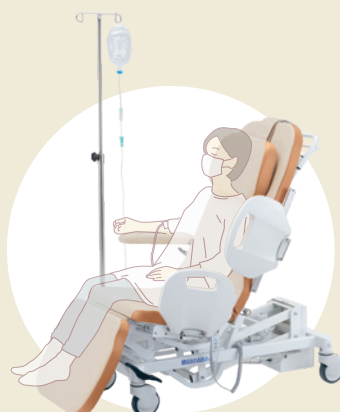

[使用オプション]

- ・脚側イルリガートル架BK付 [CR-LPRC-DC]
- ・アームサポートR [CR-LPR-ASR]
- ・枕(大) [CR-LPR-M]

Option Customize

体位別オプションカスタマイズ例

共通オプション



EB-BFT-M
枕



CR-LPR-M
枕(大)




EX-CS-AT
上肢台



CR-LPR-ASR
アームサポートR



DR-OPTM-G05
側臥位用上肢台M

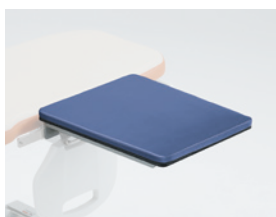

DR-OPTM-SIBK/SIK
透視用上肢台小型M
※クッションなしタイプもご用意しています。
(DR-OPTM-SIA/SIB)



EX-CS-E
胸受け




EX-CS-EN
自在胸受け



CR-LPR-BH
酸素ポンベホルダー(500L細型用)
※酸素ポンベは含みません。



EX-CS-BLM
スクリーン架

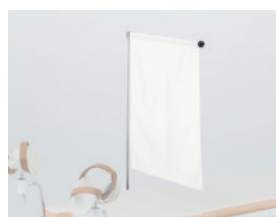


CR-LPR-CB
カーテン架



EX-CS-TD
多機能置き台

Mタイプ専用

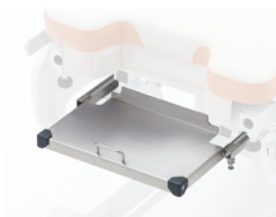


CR-LPR-BT
バット受け



CR-LPR-XT / CR-LPR-XTR
汚水トレイ / 汚水トレイR(ロート付)
※写真はCR-LPR-XTです。



クロス掛け
※クロス掛けの取り付けには、汚水トレイ
(CR-LPR-XT/CR-LPR-XTR)が必要です。

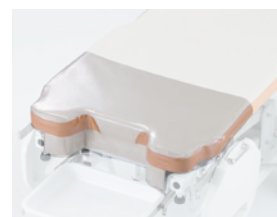

CR-LPR-SC
シートカバー



CR-LPR-CZ
股受



DR-OPTM-KTEK
KTEK3100スターラップ
※クランプ、カートは別売です。



CR-LPR-CN
支脚器



CR-LPR-H
下腿受け
※Cタイプに取り付ける際は、LPRC用サイドレール(CR-LPRC-SR)が必要です。




CR-LPR-KM
小物トレイ



CR-LPR-FK
フットスイッチ(小物トレイ付)



EB-BFT-SC
サイドフェンスカバー

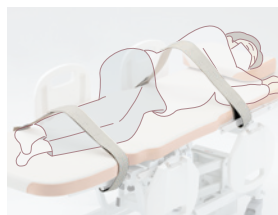

CR-LPR-B
体位保持ベルト



CR-LPR-DC/CR-LPR-DC-BK
中央側イルリガートル架(取付ブラケット1個付)/追加ブラケット



DR-OPTM-ZNN
イルリガートル架



CR-LPR-PH/DG-OPT-R35
ロールシートホルダー/ロールシート



CR-LPR-AC
LPRカート



DR-LIBP
バッテリーパック
※充電器は含みません



DR-LICHG
充電器




追加キャストロックペダル



CR-LPRC-SR
LPRC用サイドレール(左右1組)



CR-LPRC-DC/CR-LPRC-DC-BK
脚側イルリガートル架(取付ブラケット1個付)/追加ブラケット

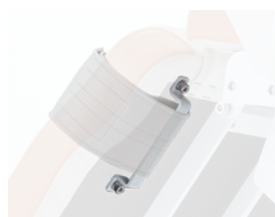

CR-LPRC-BL
体位保持ベルトホルダー(左右1組)
※体位保持ベルトは含みません。

製品コード	一般的名称	特定保守	製造販売届出番号	販売名	製造販売業者
DR-OPTM-KTEK	手術台アクセサリ	非該当	14B1X00004000131	KTEKスターラップ	ガデリウス・メディカル株式会社
DR-OPTM-G05	手術台アクセサリ	非該当	28B1X00012000032	側臥位用上肢台M	タカラメディカル株式会社
DR-OPTM-SIBK/IAK	手術台アクセサリ	非該当	28B1X00012000047	遠視用上肢台小型M	タカラメディカル株式会社

※当カタログに掲載のないオプションの取り付けはできません。

■ガデリウス・メディカル株式会社 神奈川県相模原市中央区富士見2-7-1 ■タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

Color Selection



ES9(アイボリー)×ES14(キャメル)
[標準色]



ES9(アイボリー)
×ES20(コーラルピンク)



ES9(アイボリー)
×ES23(アルドブルー)

※写真はMタイプ(CR-LPRM)です。

抗菌・耐アルコール仕様の合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801 : 2012「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性


アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

Specifications


製品コード	CR-LPRM(Mタイプ), CR-LPRC(Cタイプ)
本体寸法	600mm×1850mm(テーブルトップ寸法)
本体昇降範囲	500mm～930mm(電動ギアモータ式)
サイドフェンス	回転収納式
キャスター	直進ロック、4輪ロック、4輪フリー切替え式
電気定格	DC21.6V 155VA

質量	93kg
主な構成	ハンドスイッチ1個、バッテリーパック1個
一般的名称	汎用診断・処置用テーブル
特定保守	非該当
製造販売届出番号	27B1X00042000092
販売名	ルーバー

Dimensions

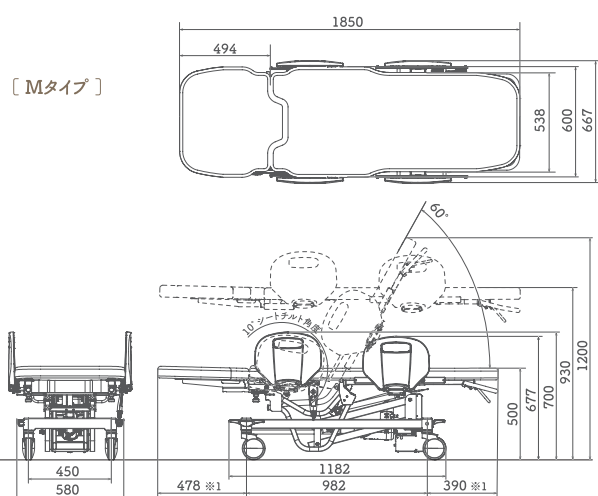

[Mタイプ]

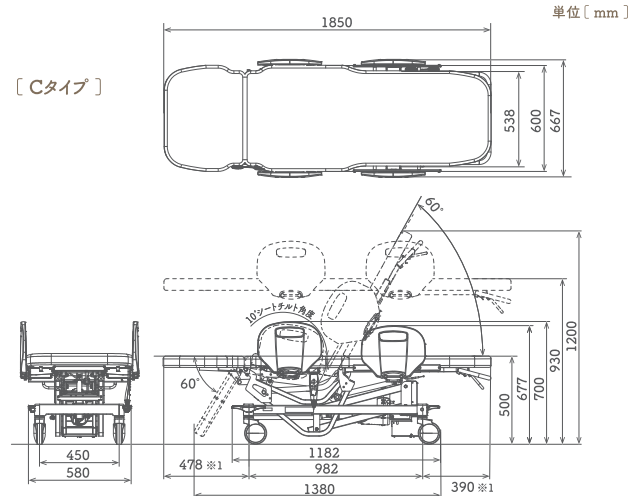

[Cタイプ]

※1 本体高さが初高のときの寸法です。本体高さによって異なります。

TAKARA BELMONT DESIGN WORKS




タカラベルモントの医療空間づくり

設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

タカラベルモント メディカル営業部公式

施工事例やお役立ち情報を発信中♪ @takara_designworks_medical

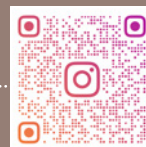

タカラベルモント株式会社

[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

● メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま(048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋(052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takaravelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年9月現在のものです。

お問合せは